

# Ace primax

Οδηγός Χρήστη



Hearing  
Systems

**SIEMENS**

# Περιεχόμενα

<b>Καλώς ήρθατε</b>	<b>4</b>
<b>Τα ακουστικά σας</b>	<b>5</b>
Τύπος ακουστικού	5
Εξοικείωση με τα ακουστικά σας	5
Εξαρτήματα και ονομασίες	6
Στοιχεία ελέγχου	8
Ρυθμίσεις	9
<b>Μπαταρίες</b>	<b>10</b>
Μέγεθος μπαταρίας και συμβουλές χειρισμού	10
Αντικατάσταση μπαταριών	11
<b>Καθημερινή χρήση</b>	<b>12</b>
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	12
Τοποθέτηση και αφαίρεση των ακουστικών	14
Ρύθμιση έντασης ήχου	17
Αλλαγή προγράμματος ακοής	17
<b>Ειδικές ακουστικές συνθήκες</b>	<b>18</b>
Τηλεφωνική συνομιλία	18
<b>Συντήρηση και φροντίδα</b>	<b>19</b>
Ακουστικά	19
Εξαρτήματα για το αυτί	20
Επαγγελματική συντήρηση	22

<b>Περισσότερες πληροφορίες</b>	<b>23</b>
Πληροφορίες ασφάλειας	23
Εξαρτήματα	23
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο	23
Αντιμετώπιση προβλημάτων	24
Πληροφορίες ειδικές για κάθε χώρα	26
Συντήρηση και εγγύηση	27

## Καλώς ήρθατε

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ακουστικά μας, τα οποία θα σας συνοδεύουν σε κάθε καθημερινή σας δραστηριότητα. Ενδέχεται να χρειαστείτε λίγο χρόνο μέχρι να εξοικειωθείτε μαζί τους, όπως συμβαίνει με καθετί νέο.

Αυτός ο οδηγός, σε συνδυασμό με την υποστήριξη του ειδικού σε θέματα ακοής, θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα οφέλη και τη βελτιωμένη ποιότητα ζωής που σας προσφέρουν τα ακουστικά σας.

Για να επωφεληθείτε στο έπακρο από τα ακουστικά σας, συνιστάται να τα φοράτε καθημερινά και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έτσι, θα αρχίσετε να τα συνηθίζετε.



### **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτόν τον οδηγό χρήστη και το εγχειρίδιο ασφαλείας, σχολαστικά και στο σύνολό τους. Ακολουθήστε τις πληροφορίες ασφαλείας για να αποφύγετε την πρόκληση βλαβών ή τραυματισμών.

# Τα ακουστικά σας

**i**

Αυτός ο οδηγός χρήστη περιγράφει προαιρετικά χαρακτηριστικά που ενδέχεται να έχουν ή να μην έχουν τα ακουστικά σας.

Ζητήστε από τον ειδικό σε θέματα ακοής να σας δείξει τα χαρακτηριστικά που διαθέτουν όντως τα ακουστικά σας.


## Τύπος ακουστικού

Το μοντέλο των ακουστικών σας είναι RIC (Receiver-in-Canal, δέκτης εντός του καναλιού). Ο δέκτης τοποθετείται εντός του καναλιού του αυτιού και συνδέεται με το ακουστικό μέσω ενός καλωδίου δέκτη. Τα ακουστικά δεν προορίζονται για παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών ή άτομα σε ανάπτυξη κάτω των 3 ετών.

## Εξοικείωση με τα ακουστικά σας




Συνιστάται να εξοικειωθείτε με τα νέα σας ακουστικά. Κρατώντας τα ακουστικά στο χέρι σας προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου και απομνημονεύστε τη θέση τους στο ακουστικό. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο εύκολο να νιώθετε και να πατάτε τα στοιχεία ελέγχου ενώ φοράτε τα ακουστικά.
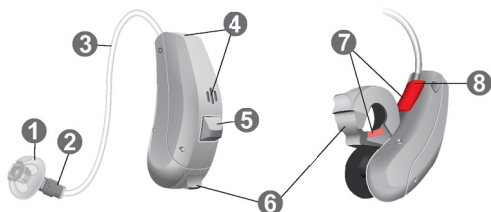
## Εξαρτήματα και ονομασίες





- 
- |                        |   |
|------------------------|---|
| ① Εξάρτημα για το αυτί | ⑥ Θήκη μπαταρίας  |
| ② Δέκτης               | ⑦ Ένδειξη πλευράς<br>(κόκκινο = δεξί αυτί,<br>μπλε = αριστερό αυτί) |
| ③ Καλώδιο δέκτη        | ⑧ Σύνδεση δέκτη   |
| ④ Οπές μικροφώνου      |   |
| ⑤ Κουμπί               |   |
-

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τυπικά ή κατά παραγγελία εξαρτήματα για το αυτί.


<b>Τυπικά εξαρτήματα για το αυτί</b>	<b>Μέγεθος</b>
<input type="radio"/>  Click Dome™ μονό (ανοικτό ή κλειστό)	
<input type="radio"/>  Click Dome ημι-κλειστό	
<input type="radio"/>  Click Dome διπλό	

Η αντικατάσταση των τυπικών εξαρτημάτων για το αυτί είναι εύκολη. Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα "Συντήρηση και φροντίδα".

<b>Κατά παραγγελία εξαρτήματα για το αυτί</b>	
<input type="radio"/>  Προσαρμοσμένο κέλυφος	
<input type="radio"/>  Click Mold™	

## Στοιχεία ελέγχου

Με το κουμπί μπορείτε, για παράδειγμα, να εκτελέσετε εναλλαγή των προγραμμάτων ακοής. Ο ειδικός σε θέματα ακοής έχει προγραμματίσει τις επιθυμητές λειτουργίες στο κουμπί.

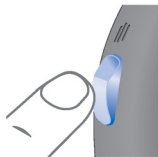

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια εφαρμογή smartphone κινητού για χειρισμό εξ αποστάσεως.

### Λειτουργία κουμπιού

L

R

Πατήστε στιγμιαία:

Αλλαγή προγράμματος

Πατήστε παρατεταμένα:

Αναμονή/ενεργοποίηση

L = Αριστερά (Left), R = Δεξιά (Right)



## Ρυθμίσεις

### Προγράμματα ακοής

---

1

---

2

---

3

---

4

---

5

---

6

---

Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα  
«Αλλαγή προγράμματος ακοής».

### Λειτουργίες

- Με τη λειτουργία **καθυστέρησης ενεργοποίησης** είναι δυνατή η εισαγωγή των ακουστικών χωρίς σφυρίγματα.

Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα  
«Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση».

- Η **λειτουργία θεραπείας εμβοών** παράγει έναν ήχο για να σας αποσπά από την εμβοή.

# Μπαταρίες

Όταν το φορτίο της μπαταρίας είναι χαμηλό, ο ήχος εξασθενεί ή εκπέμπεται ένα προειδοποιητικό σήμα. Ο τύπος της μπαταρίας προσδιορίζει το χρονικό περιθώριο που έχετε για να αντικαταστήσετε την μπαταρία.

## Μέγεθος μπαταρίας και συμβουλές χειρισμού

Απευθυνθείτε σε έναν ειδικό σε θέματα ακοής για συνιστώμενες μπαταρίες.

---

Μέγεθος μπαταρίας:	10
--------------------	----

---

- Χρησιμοποιείτε πάντα το σωστό μέγεθος μπαταριών για τα ακουστικά σας.
- Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά για αρκετές ημέρες, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Έχετε πάντα διαθέσιμες εφεδρικές μπαταρίες.
- Αφαιρέστε αμέσως τις άδειες μπαταρίες και ακολουθήστε τους εκάστοτε τοπικούς κανόνες ανακύκλωσης που ισχύουν για την απόρριψη μπαταριών.

## Αντικατάσταση μπαταριών

Αφαίρεση της μπαταρίας:

- ▶ Ανοίξτε τη θήκη της μπαταρίας.



- ▶ Χρησιμοποιήστε τη μαγνητική ράβδο για να τραβήξετε προς τα έξω την μπαταρία. Η μαγνητική ράβδος διατίθεται ως αξεσουάρ.



Τοποθέτηση της μπαταρίας:

- ▶ Εάν η μπαταρία έχει κάποια προστατευτική μεμβράνη, αφαιρέστε τη μόνο όταν είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε την μπαταρία.



- ▶ Τοποθετήστε την μπαταρία με το σύμβολο "+" στραμμένο προς τα επάνω (ανατρέξτε στην εικόνα).



- ▶ Κλείστε προσεκτικά τη θήκη της μπαταρίας. Εάν συναντήσετε αντίσταση, η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

Μην επιχειρήσετε να κλείσετε τη θήκη της μπαταρίας ασκώντας δύναμη. Μπορεί να προκληθεί ζημιά.

# Καθημερινή χρήση

## Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση των ακουστικών σας.

Μέσω της θήκης της μπαταρίας:

- ▶ Ενεργοποίηση: Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.  
Επιλέγεται η **προεπιλεγμένη** ένταση και το προεπιλεγμένο πρόγραμμα ακοής.
- ▶ Απενεργοποίηση: Ανοίξτε τη θήκη της μπαταρίας μέχρι το πρώτο γαντζάκι.

Μέσω κουμπιού:

- ▶ Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για μερικά δευτερόλεπτα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Στοιχεία ελέγχου" για τις ρυθμίσεις των δικών σας στοιχείων ελέγχου.

Μετά την ενεργοποίηση, παραμένουν ενεργά η ένταση και το πρόγραμμα ακοής που χρησιμοποιούσατε **προηγουμένως**.

Όταν φοράτε τα ακουστικά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν προειδοποιητικό ήχο που θα υποδεικνύει αν το ακουστικό ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **καθυστέρησης ενεργοποίησης**, τα ακουστικά ενεργοποιούνται με καθυστέρηση μερικών δευτερολέπτων. Σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορείτε να εισαγάγετε τα ακουστικά στα αυτιά σας χωρίς να αντιμετωπίσετε το ενοχλητικό αναδραστικό σφύριγμα.

Η λειτουργία "καθυστέρησης ενεργοποίησης" μπορεί να ενεργοποιηθεί από τον Ειδικό σε Θέματα Ακοής.

## Τοποθέτηση και αφαίρεση των ακουστικών

Τα ακουστικά σας έχουν ρυθμιστεί με ακρίβεια για το δεξί και το αριστερό αυτί σας. Η κάθε πλευρά υποδεικνύεται από έγχρωμα σημάδια:

- κόκκινο σημάδι = δεξί αυτί
- μπλε σημάδι = αριστερό αυτί




Τοποθέτηση ενός ακουστικού:

- ▶ Κρατήστε το καλώδιο δέκτη στο τμήμα κάμψης που είναι πιο κοντά στο εξάρτημα για το αυτί.
- ▶ Ωθήστε προσεκτικά το εξάρτημα για το αυτί μέσα στο κανάλι του αυτιού **1**.
- ▶ Περιστρέψτε το ελαφρώς για να εφαρμόσει καλά.

Ανοίξτε και κλείστε το στόμα σας, για να αποφευχθεί η συσσώρευση αέρα στο κανάλι του αυτιού.

- ▶ Ανασηκώστε το ακουστικό και σύρετέ το πάνω από το αυτί σας **2**.

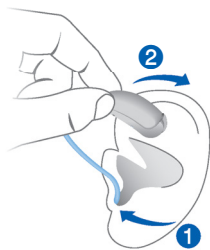

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού!

- ▶ Τοποθετήστε προσεκτικά το ηχείο στο αυτί και όχι σε μεγάλο βάθος.

**i**

- Συνιστάται η εισαγωγή του **δεξιού** ακουστικού με το **δεξί** χέρι και του **αριστερού** ακουστικού με το **αριστερό** χέρι.
- Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την εισαγωγή του ακουστικού, χρησιμοποιήστε το άλλο σας χέρι για να τραβήξετε προσεκτικά το λοβό του αυτιού προς τα κάτω. Με τον τρόπο αυτό, ανοίγει το κανάλι του αυτιού και διευκολύνεται η εισαγωγή του εξαρτήματος για το αυτί.


Το προαιρετικό έμβολο συγκράτησης βοηθά στην ασφαλή συγκράτηση του εξαρτήματος για το αυτί μέσα στο αυτί σας. Για να τοποθετήσετε το έμβολο συγκράτησης:

- ▶ Κάμψτε το έμβολο συγκράτησης και τοποθετήστε το προσεκτικά στο κάτω μέρος του πτερυγίου του αυτιού σας (ανατρέξτε στην εικόνα).



Αφαίρεση ενός ακουστικού:

- ▶ Ανασηκώστε το ακουστικό και σύρετέ το πάνω από το αυτί σας **1**.
- ▶ Εάν το ακουστικό σας διαθέτει προσαρμοσμένο κέλυφος ή Click Mold, αφαιρέστε το τραβώντας το μικρό κορδόνι αφαίρεσης προς το πίσω μέρος του κεφαλιού σας.
- ▶ Για όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα για το αυτί: Πιάστε το δέκτη στο κανάλι του αυτιού με δύο δάκτυλα και τραβήξτε τον προσεκτικά προς τα έξω **2**.

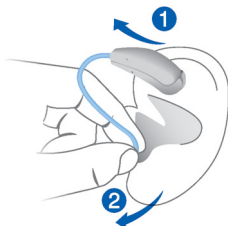

Μην τραβάτε το καλώδιο δέκτη.



### **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Κίνδυνος τραυματισμού!

- ▶ Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις το ηχείο μπορεί να παραμείνει στο αυτί σας κατά την αφαίρεση του ακουστικού. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, απευθυνθείτε σε ιατρό για να αφαιρέσει το ηχείο.

Καθαρίζετε και στεγνώνετε τα ακουστικά σας μετά τη χρήση. Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα "Συντήρηση και φροντίδα".



## Ρύθμιση έντασης ήχου

Τα ακουστικά σας προσαρμόζουν αυτόματα την ένταση στις ακουστικές απαιτήσεις κάθε περιστασης.



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια εφαρμογή smartphone κινητού για το χειρισμό της έντασης ήχου.

## Αλλαγή προγράμματος ακοής

Ανάλογα με τις ακουστικές συνθήκες, τα ακουστικά σας προσαρμόζουν αυτόματα τον ήχο.

Επίσης, τα ακουστικά σας ενδέχεται να έχουν διάφορα προγράμματα ακοής, τα οποία σας επιτρέπουν να αλλάζετε τον ήχο, εφόσον αυτό απαιτείται. Προαιρετικά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα ηχητικό σήμα που θα υποδεικνύει την αλλαγή προγράμματος.

- ▶ Για να αλλάξετε το πρόγραμμα ακοής, πατήστε στιγμιαία το κουμπί.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Στοιχεία ελέγχου" για τον ορισμό των δικών σας στοιχείων ελέγχου. Για τη λίστα των προγραμμάτων ακοής, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις".

# Ειδικές ακουστικές συνθήκες

## Τηλεφωνική συνομιλία

Όταν μιλάτε στο τηλέφωνο, κρατάτε το δέκτη του τηλεφώνου ελαφρώς πάνω από το αυτί σας. Το ακουστικό και ο δέκτης τους τηλεφώνου πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα. Στρέψτε ελαφρώς το δέκτη, ώστε να μην καλύπτεται τελείως το αυτί.



## Πρόγραμμα τηλεφώνου

Μπορεί να επιθυμείτε συγκεκριμένη ένταση κατά τη χρήση του τηλεφώνου. Απευθυνθείτε στον Ειδικό σε Θέματα Ακοής για τη διαμόρφωση ενός προγράμματος τηλεφώνου.

- ▶ Αλλάξτε σε πρόγραμμα τηλεφώνου όταν μιλάτε στο τηλέφωνο.

Στην ενότητα "Ρυθμίσεις" μπορείτε να διαπιστώσετε αν τα ακουστικά σας έχουν διαμορφωθεί για το πρόγραμμα τηλεφώνου.

# Συντήρηση και φροντίδα

Για να αποφευχθεί η πρόκληση βλαβών, είναι σημαντικό να φροντίζετε τα ακουστικά σας και να ακολουθείτε ορισμένους βασικούς κανόνες, οι οποίοι σύντομα θα ενσωματωθούν στην καθημερινή σας ρουτίνα.

## Ακουστικά

### Στέγνωμα και αποθήκευση

- ▶ Αφήνετε τα ακουστικά σας να στεγνώνουν κατά τη διάρκεια της νύχτας.
- ▶ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συνιστώμενα προϊόντα στεγνώματος, απευθυνθείτε σε έναν Ειδικό σε Θέματα Ακοής.
- ▶ Για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μη χρήσης, αποθηκεύετε τα ακουστικά σας με τη θήκη μπαταριών ανοικτή και χωρίς τις μπαταρίες σε ένα σύστημα αφύγρανσης, ώστε να αποφευχθούν οι ανεπιθύμητες ενέργειες της υγρασίας.

### Καθαρισμός

Τα ακουστικά σας διαθέτουν μια προστατευτική επίστρωση. Ωστόσο, εάν δεν τα καθαρίζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη σε αυτά ή να τραυματιστείτε.

- ▶ Καθαρίζετε τα ακουστικά σας καθημερινά με ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τρεχούμενο νερό ή εμβυθίζετε τις συσκευές σε νερό.
- ▶ Μην ασκείτε ποτέ πίεση κατά τον καθαρισμό.



- ▶ Για συνιστώμενα προϊόντα καθαρισμού, ειδικά σετ φροντίδας ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διατήρηση των ακουστικών σας σε καλή κατάσταση, απευθυνθείτε σε έναν ειδικό σε θέματα ακοής.

## Εξαρτήματα για το αυτί


### Καθαρισμός

Ενδέχεται να συσσωρευτεί κυψελίδα (κερί των αυτιών) στα εξαρτήματα για το αυτί. Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα του ήχου. Καθαρίζετε τα εξαρτήματα για το αυτί σε καθημερινή βάση.

Για όλους τους τύπους εξαρτημάτων για το αυτί:

- ▶ Αμέσως αφού το αφαιρέσετε, καθαρίστε το εξάρτημα για το αυτί με ένα μαλακό και στεγνό ύφασμα.

Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η ξήρανση και η σκλήρυνση της κυψελίδας.

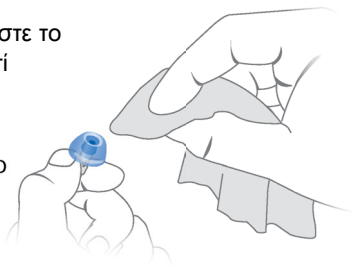

Για το Click Domes:

- ▶ Πιέστε το άκρο του θόλου.




## Αντικατάσταση

Αντικαθιστάτε τα τυπικά εξαρτήματα για το αυτί περίπου κάθε τρεις μήνες. Εάν παρατηρήσετε ρωγμές ή άλλες αλλαγές, αντικαταστήστε τα νωρίτερα. Η διαδικασία για την αντικατάσταση των τυπικών εξαρτημάτων για το αυτί εξαρτάται από τον τύπο του εξαρτήματος. Στην ενότητα "Εξαρτήματα και ονομασίες", ο ειδικός σε θέματα ακοής έχει επισημάνει τον τύπο του εξαρτήματος που διαθέτετε.

### Αντικατάσταση Click Domes

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την αφαίρεση του παλιού Click Dome, χρησιμοποιήστε το εργαλείο αφαίρεσης ή ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευασία του Click Domes:

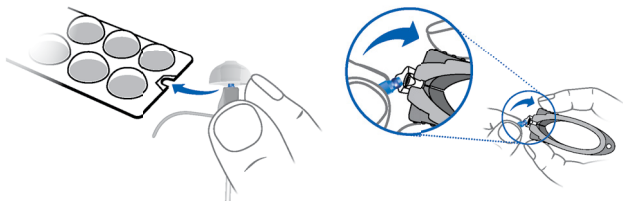

Το εργαλείο αφαίρεσης διατίθεται ως αξεσουάρ.

- ▶ Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε το νέο Click Dome να ασφαλίσει καλά στη θέση του.



## **Επαγγελματική συντήρηση**

Ο ειδικός σε θέματα ακοής μπορεί να εκτελέσει σχολαστικές επαγγελματικές εργασίες καθαρισμού και συντήρησης.

Τα κατά παραγγελία εξαρτήματα για το αυτί και τα φίλτρα κεριού πρέπει να αντικαθίστανται από κάποιον επαγγελματία.

Για εξατομικευμένα συνιστώμενα διαστήματα συντήρησης και για υποστήριξη, απευθυνθείτε στον ειδικό σε θέματα ακοής.

# Περισσότερες πληροφορίες

## Πληροφορίες ασφάλειας

Για περισσότερες πληροφορίες ασφάλειας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ασφάλειας που συνοδεύει τη συσκευή.

## Εξαρτήματα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια εφαρμογή smartphone κινητού για χειρισμό εξ αποστάσεως.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε έναν ειδικό σε θέματα ακοής.

## Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο



Υποδεικνύει μια κατάσταση που ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρό, μέτριο ή ελαφρύ τραυματισμό.



Υποδεικνύει πιθανές υλικές ζημιές.



Συμβουλές και υποδείξεις για τη βέλτιστη χρήση της συσκευής σας.

---

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

### Πρόβλημα και πιθανές λύσεις

---

Η ένταση του ήχου είναι χαμηλή.

---

- Αντικαταστήστε την εξαντλημένη μπαταρία.
  - Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το εξάρτημα για το αυτί.
- 

Το ακουστικό εκπέμπει ένα σφύριγμα.

---

- Τοποθετήστε ξανά το εξάρτημα για το αυτί μέχρι να εφαρμόσει σωστά.
  - Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το εξάρτημα για το αυτί.
- 

Ο ήχος ακούγεται παραμορφωμένος.

---

- Αντικαταστήστε την εξαντλημένη μπαταρία.
  - Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το εξάρτημα για το αυτί.
- 

Το ακουστικό εκπέμπει χαρακτηριστικούς ήχους.

---

- Αντικαταστήστε την εξαντλημένη μπαταρία.
-



## Πρόβλημα και πιθανές λύσεις

---

Το ακουστικό δεν λειτουργεί.

---

- Ενεργοποιήστε το ακουστικό.
  - Κλείστε προσεκτικά και εντελώς τη θήκη της μπαταρίας.
  - Αντικαταστήστε την εξαντλημένη μπαταρία.
  - Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά.
  - Η λειτουργία καθυστέρησης ενεργοποίησης είναι ενεργή. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και ελέγξτε ξανά.
- 

Εάν αντιμετωπίσετε περαιτέρω προβλήματα, επικοινωνήστε με έναν ειδικό σε θέματα ακοής.

## **Πληροφορίες ειδικές για κάθε χώρα**

## Συντήρηση και εγγύηση

Σειριακοί αριθμοί

Ακουστικό

Δέκτης

---

Αριστερά:

---

Δεξιά:

---

### Ημερομηνίες συντήρησης

---

1:

4:

---

2:

5:

---

3:

6:

---

### Εγγύηση

---

Ημερομηνία αγοράς:

---

Περίοδος εγγύησης σε μήνες:

---

### Ο ειδικός σε θέματα ακοής

---



**Νόμιμος κατασκευαστής**

Signia GmbH

Henri-Dunant-Strasse 100

91058 Erlangen

Γερμανία

Τηλέφωνο +49 9131 308 0

Κατασκευάστηκε από τη Signia GmbH βάσει άδειας χρήσης  
εμπορικού σήματος της Siemens AG.

Document No. 02717-99T01-3D00 EL

Order/Item No. 109 360 63

Master Rev02, 01.2016

© Signia GmbH, 02.2016

**CE**  
0123

**[www.signia-hearing.com](http://www.signia-hearing.com)**