

Pure primax

Gebruikershandleiding



Hearing
Systems

SIEMENS

Inhoudsopgave

Welkom	4
<hr/>	
Uw hoortoestellen	5
<hr/>	
Type toestel	5
Vertrouwd raken met uw hoortoestellen	5
Componenten en benamingen	6
Bedieningsregelaars	8
Instellingen	10
Batterijen	12
<hr/>	
Batterijformaat en hanteertips	12
Batterijen vervangen	13
Oplaadbare batterijen herladen	14
Dagelijks gebruik	15
<hr/>	
In- en uitschakelen	15
De hoortoestellen plaatsen en verwijderen	17
Het volume aanpassen	20
Het kiezen van een luisterprogramma	20
Bijkomende aanpassingen (optioneel)	21
Bijzondere luistersituaties	22
<hr/>	
De focus instellen (optioneel)	22
Aan de telefoon	24
Ringleidingen	26

Onderhoud en behandeling	27
Hoortoestellen	27
Oorstukjes	29
Professioneel onderhoud	31
Meer informatie	32
Draadloze functie	32
Accessoires	32
In dit document gebruikte symbolen	33
Problemen oplossen	33
Specifieke nationale informatie	34
Service en garantie	35

Welkom

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor onze hoortoestellen. Natuurlijk heeft u, net zoals met alle nieuwigheden, even tijd nodig om hiermee vertrouwd te raken.

Deze handleiding zal u samen met de ondersteuning van uw audicien helpen om meer te weten te komen over de voordelen en de betere levenskwaliteit die uw hoortoestellen u zullen bieden.

Om zo veel mogelijk uit uw hoortoestellen te halen, is het aanbevolen om ze elke dag een hele dag lang te dragen. Hierdoor zal u ze snel gewoon zijn.



VOORZICHTIG

Lees deze gebruikershandleiding en de veiligheidshandleiding grondig en volledig door. Volg de veiligheidsinformatie om schade of letsel te vermijden.

Uw hoortoestellen



Deze gebruikershandleiding beschrijft optionele functies waarover uw hoortoestellen al dan niet kunnen beschikken.

Vraag uw audicien om aan te geven welke functies geldig zijn voor uw hoortoestellen.

Type toestel

U heeft een RIC (Receiver-in-Canal (Ontvanger-in-kanaal)) model hoortoestellen. De ontvanger wordt in het oorkanaal geplaatst en met het toestel verbonden via een ontvangerkabel. De toestellen zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 3 jaar of personen met een verstandelijk niveau lager dan dat van een 3-jarige.


Vertrouwd raken met uw hoortoestellen

Het is aan te bevelen dat u zich vertrouwd maakt met uw nieuwe hoortoestellen. Terwijl u de hoortoestellen in uw hand houdt, probeert u de bedieningsregelaars te gebruiken en gaat u na waar ze zich op het instrument bevinden. Op die manier kunt u de bedieningsregelaars gemakkelijker terugvinden en bedienen wanneer u de hoortoestellen draagt.






Als u problemen heeft om de bedieningsregelaars van uw hoortoestellen te bedienen terwijl u de toestellen draagt, kunt u bij uw audicien terecht voor een optionele afstandsbediening.

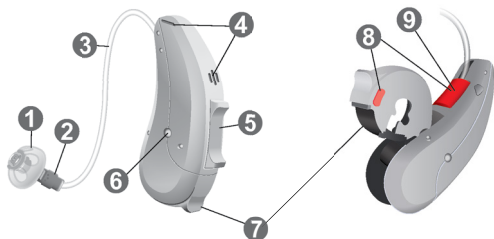Componenten en benamingen





-
- | | |
|--|--|
| 1 Oorstukje | 6 Laadcontacten (optioneel) |
| 2 Luidspreker | 7 Batterijlade |
| 3 Luidsprekerkabel | 8 Zijde-indicatie (rood = rechter oor, blauw = linker oor) |
| 4 Microfoonopeningen | 9 Luidsprekeraansluiting |
| 5 Tuimelschakelaar (standaard bedieningsregelaar), drukknop of geen bedieningsregelaar (optioneel) | |
-

U kunt standaard of op maat gemaakte oorstukjes gebruiken.

Standaard oorstukjes	Formaat
<input type="radio"/> 	Click Dome™ enkel (open of gesloten)
<input type="radio"/> 	Click Dome halfopen
<input type="radio"/> 	Click Dome dubbel


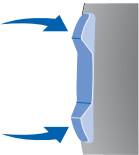
De standaard oorstukjes kunnen gemakkelijk vervangen worden. Lees meer in hoofdstuk "Onderhoud en behandeling".

Op maat gemaakte oorstukjes	
<input type="radio"/> 	Op maat gemaakt oorstukje
<input type="radio"/> 	Click Mold™

Bedieningsregelaars

Met de bedieningsregelaars kunt u bijvoorbeeld het volume aanpassen of een ander luisterprogramma kiezen. Uw hoortoestellen beschikken over een drukknop of tuimelschakelaar – of hebben geen bedieningsregelaar.

Uw audicien heeft de gewenste functies geprogrammeerd in de bedieningsregelaars.

Bedieningsregelaar		Links	Rechts
Drukknop		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tuimelschakelaar		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Geen bedieningsregelaar		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



U kunt ook een afstandsbediening gebruiken.

Functie drukknop	L	R
Druk kort:		
Programmawisseling	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Volume harder	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Volume zachter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tinnitus-therapiesignaal hoger niveau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tinnitus-therapiesignaal lager niveau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Druk lang:		
Stand-by/inschakelen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

L = Links, R = Rechts

Functie tuimelschakelaar	L	R
Druk kort:		
Programma omhoog/omlaag	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Volume harder/zachter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tinnitus-therapiesignaal hoger/lager niveau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Geluidsbalans	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Focuselectie (ruimtelijke configurator)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Druk lang:		
Stand-by/inschakelen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Programma omhoog/omlaag	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Druk heel lang:		
Stand-by/inschakelen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

L = Links, R = Rechts

Instellingen

Luisterprogramma's

1

2

3

4

5

6

Lees meer in hoofdstuk 'Het luisterprogramma wijzigen'.

Funcities

- Dankzij de **inschakelvertraging** kunt u hoortoestellen zonder fluitgeluiden inbrengen.
Lees meer in hoofdstuk "In- en uitschakelen".
- AutoPhone™** schakelt automatisch naar het telefoonprogramma wanneer de telefoonluidspreker dicht bij het oor wordt gebracht.
Lees meer in hoofdstuk "Aan de telefoon".
- TwinPhone** verzendt het telefoongesprek naar beide oren wanneer de telefoonontvanger tegen een van de oren wordt gehouden.
Lees meer in hoofdstuk "Aan de telefoon".
- De **tinnitus-therapiefunctie** genereert een geluid dat u afleidt van uw tinnitus.
- Om de batterijen van hoortoestellen met **laadcontacten** te herladen, plaatst u de toestellen gewoon in de lader. Na het laden, bevochtigt de lader de hoortoestellen.
- Met de functie **e2e wireless** kunt u beide hoortoestellen tegelijk bedienen.
Lees meer in hoofdstuk "Draadloze functie".

Batterijen

Wanneer de batterij bijna leeg is, wordt het geluid zwakker en/of hoort u een waarschuwingssignaal. Het type batterij zal bepalen wanneer u de batterij dient te vervangen of te herladen.

Batterijformaat en hanteertips

Vraag uw audicien naar de aanbevolen batterijen.

Batterijformaat:	312
------------------	-----

- Gebruik steeds het juiste batterijformaat voor uw hoortoestellen.
- Neem de batterijen uit als u de hoortoestellen enkele dagen niet wilt gebruiken.
- Draag steeds reservebatterijen bij u.
- Verwijder lege batterijen onmiddellijk en volg uw plaatselijk regelgeving met betrekking tot het verwijderen van batterijen.

Batterijen vervangen

De batterij verwijderen:

- ▶ Open de batterijlade.



- ▶ Gebruik de magneetstick om de batterij te verwijderen. De magneetstick is verkrijgbaar als accessoire.



De batterij plaatsen:

- ▶ Als de batterij een beschermende folie heeft, dient u deze pas te verwijderen wanneer u klaar bent om ze te gebruiken.



- ▶ Plaats de batterij met het "+"-symbool omhoog (raadpleeg de afbeelding).



- ▶ Sluit de batterijlade voorzichtig. Als u een weerstand voelt, is de batterij niet goed geplaatst.

Gebruik niet veel kracht bij het sluiten van de batterijlade. De lade zou beschadigd kunnen raken.

Oplaadbare batterijen herladen

Laad oplaadbare batterijen op vóór het eerste gebruik.

- ▶ Om de batterijen te laden, volgt u de instructies in de gebruiksaanwijzing van de lader.

Na vele herlaadcycli kan de batterij minder lang meegaan. In dit geval dient u de oplaadbare batterij te vervangen. Daartoe volgt u de instructies om batterijen te vervangen.

Dagelijks gebruik

In- en uitschakelen

U heeft de volgende mogelijkheden om uw hoortoestellen in of uit te schakelen.

Via de batterijlade:

- ▶ Inschakelen: Sluit de batterijlade.
Het **standaard** volume en luisterprogramma zijn ingesteld.
- ▶ Uitschakelen: Open de batterijlade tot de eerste stop.

Na het laden:

- ▶ Inschakelen: Neem de toestellen uit de lader.
Het **standaard** volume en luisterprogramma zijn ingesteld.

Via de drukknop of tuimelschakelaar:

- ▶ In- of uitschakelen: Druk de drukknop of de tuimelschakelaar in en houd deze enkele seconden ingedrukt. Raadpleeg het hoofdstuk "Bedieningsregelaars" om uw bedieningsregelaars in te stellen.

Na het inschakelen blijven het **eerder** gebruikte volume en luisterprogramma ingesteld.

Via de afstandsbediening:

- ▶ Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening op.

Na het inschakelen blijven het **eerder** gebruikte volume en luisterprogramma ingesteld.

Wanneer u de hoortoestellen draagt, kan een optionele signaaltoon aangeven wanneer een toestel in- of uitgeschakeld wordt.

Wanneer de **inschakelvertraging** geactiveerd is, schakelen de hoortoestellen met enkele seconden vertraging in. Gedurende die tijd kunt u de hoortoestellen plaatsen zonder een vervelend fluitgeluid te horen.

De "inschakelvertraging" kan door uw audicien worden geactiveerd.

De hoortoestellen plaatsen en verwijderen

Uw hoortoestellen zijn afgesteld op uw rechter en linker oor. Kleurmarkeringen geven de zijde aan:

- rode markering = rechter oor
- blauwe markering = linker oor




Een hoortoestel plaatsen:

- ▶ Houd de ontvangerkabel vast aan de bocht die het dichtst bij het oorstukje is.
- ▶ Duw het oorstukje voorzichtig in de gehoorgang **1**.
- ▶ Draai het lichtjes tot het goed zit.

Open en sluit uw mond om te voorkomen dat er zich lucht in de gehoorgang ophoopt.

- ▶ Til het hoortoestel omhoog en schuif het over de bovenzijde van uw oor **2**.

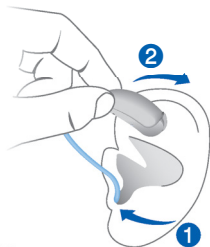

VOORZICHTIG

Risico op letsel!

- ▶ Plaats het oorstukje voorzichtig en niet te diep in het oor.

i

- Het kan handig zijn om het **rechter** hoortoestel met de **rechter** hand en het **linker** hoortoestel met de **linker** hand te plaatsen.
- Als u problemen heeft met het inbrengen van het oorstukje, gebruikt u de andere hand om uw oorlel voorzichtig omlaag te trekken. Hierdoor gaat de gehoorgang open en kan het oorstukje gemakkelijker worden ingebracht.

De optionele vasthouddraad zorgt ervoor dat het oorstukje veilig in uw oor blijft zitten.


Om de vasthouddraad te plaatsen:

- ▶ Buig de vasthouddraad en plaats deze voorzichtig in de binnenrand van uw oorschelp (raadpleeg de afbeelding).



Een hoortoestel verwijderen:

- ▶ Til het hoortoestel omhoog en schuif het over de bovenzijde van uw oor **1**.
- ▶ Als uw hoortoestel uitgerust is met een op maat gemaakt oorstukje of een Click Mold, verwijdert u deze door het kleine trekkoord naar de achterzijde van uw hoofd te trekken.
- ▶ Voor alle andere oorstukjes: Pak de luidspreker in de gehoorgang vast met twee vingers en trek de luidspreker voorzichtig uit het oor **2**.

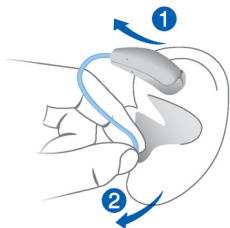

Trek niet aan de ontvangerkabel.



VOORZICHTIG

Risico op letsel!

- ▶ In zeer zelden voorkomende gevallen kan het oorgedeelte in uw oor achterblijven wanneer u het hoortoestel uitneemt. Als dit gebeurt, laat het oorgedeelte dan verwijderen door een medicus.

Reinig en droog uw hoortoestellen na gebruik.

Lees meer in hoofdstuk "Onderhoud en behandeling".

Het volume aanpassen

Uw hoortoestellen passen automatisch het volume aan de luistersituatie aan.

- ▶ Als u een handmatige aanpassing van het volume verkiest, drukt u kort op de drukknop of de tuimelschakelaar of gebruikt u een afstandsbediening.

Raadpleeg het hoofdstuk "Bedieningsregelaars" om uw bedieningsregelaars in te stellen.

Een optioneel signaal kan de volumewijziging aangeven. Van zodra het maximale of het minimale volume bereikt is, hoort u mogelijk een optionele signaaltoon.

Het kiezen van een luisterprogramma

Afhankelijk van de luistersituatie passen uw hoortoestellen het geluid automatisch aan.

Uw hoortoestellen hebben mogelijk ook een aantal luisterprogramma's waarmee u het geluid, indien nodig, kunt wijzigen. Een optionele signaaltoon kan de programmawijziging aangeven.

- ▶ Om het luisterprogramma te wijzigen, drukt u op de drukknop of tuimelschakelaar of gebruikt u een afstandsbediening.

Raadpleeg het hoofdstuk "Bedieningsregelaars" om uw bedieningsregelaars in te stellen. Raadpleeg de paragraaf "Instellingen" voor een lijst van uw hoorprogramma's.



Indien de functie AutoPhone of TwinPhone is geactiveerd, schakelt het luisterprogramma automatisch naar een telefoonprogramma wanneer de telefoonluidspreker zich dicht bij het hoortoestel bevindt.

Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Aan de telefoon".

Bijkomende aanpassingen (optioneel)

De bedieningsregelaars van uw hoortoestellen kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt om de geluidsbalans of het tinnitus-therapieniveau te wijzigen. Met de geluidsbalans kunt u de hoge en lage tonen aan uw voorkeur aanpassen.

Raadpleeg het hoofdstuk "Bedieningsregelaars" om uw bedieningsregelaars in te stellen.

Bijzondere luistersituaties

De focus instellen (optioneel)

Als u direct wilt focussen op uw gesprekspartner of als u naar een bredere omgeving wilt luisteren – de ruimtelijke configurator geeft u de controle over uw luistervoorkeuren.

U kunt verschillende niveaus selecteren – van "focus naar frontaal" (afbeelding links) naar "midden" (afbeelding in het midden) tot "omgeving beluisteren" (afbeelding rechts).



Noodzakelijk:

- U dient twee hoortoestellen te dragen.
- Op een van uw hoortoestellen dient de tuimelschakelaar te worden ingesteld voor de ruimtelijke configurator door uw audicien.

Raadpleeg het hoofdstuk "Bedieningsregelaars" om de tuimelschakelaar in te stellen.

Met een geschikte smartphone app hebt u nog meer bedieningsmogelijkheden.

De focus manueel instellen:

- ▶ Als u meerdere luisterprogramma's heeft, schakel dan over naar luisterprogramma 1.
- ▶ Druk op de voor deze functie ingestelde tuimelschakelaar.

Standaard is het middelste niveau actief.

- ▶ Druk op de bovenste tuimelschakelaar om meer naar voor te focussen of de onderste tuimelschakelaar om naar de bredere omgeving te luisteren.

Deze functie is bedoeld voor unieke en tijdelijke luistersituaties. De hoortoestellen keren dan ook automatisch terug naar de automatische instelling van programma 1 als de geluidsomgeving aanzienlijk wijzigt of na ongeveer 45 minuten. U kunt de modus van de ruimtelijke configurator ook verlaten.

De modus van de ruimtelijke configurator verlaten:

- ▶ Schakel naar het minimale of het maximale niveau.
Een optionele signaaltoon kan het minimale en het maximale niveau aangeven.
- ▶ Schakel één stap verder.

De signaaltoon voor wijzigen van het luisterprogramma wordt afgespeeld en geeft aan dat u de modus van de ruimtelijke configurator heeft verlaten.

Aan de telefoon

Wanneer u telefoneert, houdt u de telefoonluidspreker iets boven uw oor. Het hoortoestel en de telefoonluidspreker moeten op elkaar uitgelijnd zijn. Draai de luidspreker lichtjes, zodat het oor niet volledig bedekt is.



Telefoonprogramma

U prefereert een bepaald volume wanneer u de telefoon gebruikt. Vraag uw audicien om een telefoonprogramma te configureren.

- ▶ Schakel naar het telefoonprogramma wanneer u telefoneert of gebruik de automatische programmaschakelaar.

In het hoofdstuk "Instellingen" is aangegeven of een telefoonprogramma of de automatische programmaschakelaar voor uw hoortoestellen is geconfigureerd.

Automatische programma-omschakeling (AutoPhone of TwinPhone)

Uw hoortoestel kan **automatisch** het telefoonprogramma selecteren wanneer u de telefoonhandset dicht bij uw oor houdt. TwinPhone kan het gesprek zelfs naar beide oren verzenden. Wanneer het telefoongesprek is afgerond, beweegt u de handset weg van het hoortoestel en zal de microfoonmodus zichzelf opnieuw instellen.

Als u deze functie wilt gebruiken, vraagt u aan uw audicien het volgende te doen:

- De functie AutoPhone of TwinPhone activeren.
- Het magnetisch veld van de telefoonluidspreker controleren.

Voor de automatische programma-omschakeling detecteert uw hoortoestel het magnetisch veld van de telefoonluidspreker. Niet alle telefoons genereren een magnetisch veld dat sterk genoeg is om deze functie te activeren. In dit geval gebruikt u de AutoPhone-magneet, die als accessoire leverbaar is en die u op de telefoonluidspreker bevestigt.

Zie de gebruikershandleiding van de AutoPhone-magneet voor instructies over het positioneren van de magneet.



AANWIJZING

Gebruik alleen de goedgekeurde AutoPhone-magneet. Raadpleeg voor dit accessoire uw audicien.

Ringleidingen

Sommige telefoontoestellen en openbare ruimtes zoals theaters bieden het audiosignaal (muziek en spraak) aan via een ringleiding. Met dit systeem kunnen uw hoortoestellen het gewenste signaal rechtstreeks ontvangen – zonder storende omgevingsgeluiden.

Ringleidingen worden meestal aangegeven met speciale borden.



Vraag uw audicien een ringleidingprogramma te configureren.

- ▶ Ga naar het ringleidingprogramma, wanneer u zich in een ruimte bevindt met een ringleiding.

Of een ringleidingprogramma geconfigureerd is voor uw hoortoestellen, is vermeld in het hoofdstuk "Instellingen".

Ringleidingprogramma en afstandsbediening



AANWIJZING

Voor hoortoestellen met een voorziening voor draadloze verbinding:

Wanneer het ringleiding-programma actief is, zal de afstandsbediening misschien een pulserend geluid veroorzaken.

- ▶ Gebruik de afstandsbediening op een afstand van meer dan 10 cm.

Onderhoud en behandeling

Om schade te vermijden is het belangrijk dat u zorg draagt voor uw hoortoestellen en dat u een aantal basisregels volgt. Deze zullen gauw deel gaan uitmaken van uw dagelijkse routine.

Hoortoestellen

Drogen en bewaren

- ▶ Droog uw hoortoestellen 's nachts.
- ▶ Informeer bij uw audicien naar aanbevolen droogproducten.
- ▶ Wanneer u uw hoortoestellen gedurende lange tijd niet gebruikt, bewaart u ze met open batterijlade en verwijderde batterijen in een droogstelsel, om de schadelijke gevolgen van vocht te voorkomen.

Reinigen

Uw hoortoestellen zijn voorzien van een beschermende folie. Als ze echter niet regelmatig worden gereinigd, kunnen de hoortoestellen beschadigd raken of kan u persoonlijk letsel veroorzaken.

- ▶ Reinig uw hoortoestellen dagelijks met een zachte, droge doek.
- ▶ Gebruik nooit stromend water en dompel de toestellen nooit onder in water.
- ▶ Oefen nooit druk uit tijdens het reinigen.
- ▶ Informeer bij uw audicien naar aanbevolen reinigingsprocedures, speciale verzorgingssets en verdere informatie over hoe u uw hoortoestellen in een optimale toestand kunt houden.



Oorstukjes


Reinigen

Cerumen (oorsmeer) kan zich opstapelen op de oorstukjes. Hierdoor kan de kwaliteit van het geluid beïnvloed raken. Reinig het oorstukje dagelijks.

Voor alle types oorstukjes:

- Reinig het oorstukje onmiddellijk na verwijdering met een zachte, droge doek.

Dit voorkomt dat oorsmeer droog en hard wordt.

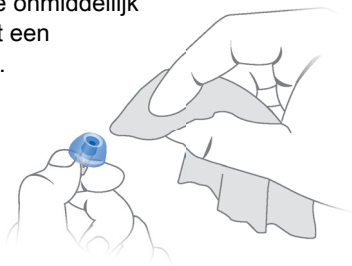

Voor Click Domes:

- Knijp op het topje van de dome.




Vervangen

Vervang standaard oorstukjes ongeveer elke drie maanden. Vervang ze eerder als u scheurtjes of andere wijzigingen opmerkt. De procedure voor het vervangen van standaard oorstukjes is afhankelijk van het type oorstukje. In hoofdstuk "Componenten en benamingen", heeft uw audicien uw type oorstukje aangeduid.

Click Domes vervangen

Als u problemen ondervindt bij het verwijderen van de oude Click Dome, gebruikt u het verwijderhulpmiddel of volgt u de instructies op de verpakking van de Click Domes:

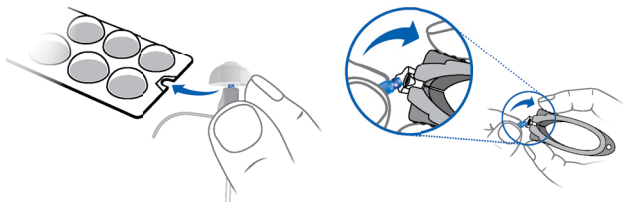

De Click Domes removal tool is als accessoire leverbaar.

- Zorg er in het bijzonder voor dat de nieuwe Click Dome duidelijk op zijn plaats klikt.



Professioneel onderhoud

Uw audicien kan uw hoortoestellen grondig reinigen en onderhouden.

Op maat gemaakte oorstukjes en smeerfilters moeten door een deskundige worden vervangen.

Vraag uw audicien naar uw individuele onderhoudstermijnen en ondersteuning.

Meer informatie

Draadloze functie

Uw hoortoestellen zijn uitgerust met een draadloze functie. Hierdoor wordt synchronisatie voorzien tussen uw twee hoortoestellen:

- Als u het programma of volume op één toestel wijzigt, wordt het andere automatisch ook gewijzigd.
- Beide hoortoestellen passen automatisch gelijktijdig aan de luistersituatie aan.

Door de draadloze functie kunt u een afstandsbediening gebruiken.

Accessoires

Het type beschikbare accessoires is afhankelijk van het type toestel. Voorbeelden hiervan zijn: een afstandsbediening, een toestel voor audiostreaming of een smartphone app voor afstandsbediening.

Sommige typen hoortoestellen ondersteunen CROS en BiCROS-oplossingen voor mensen met doofheid aan een zijde.

Raadpleeg uw audicien voor meer informatie.

In dit document gebruikte symbolen



Wijst op een situatie die tot ernstige, middelzware of onbeduidende letsels kan leiden.



Maakt u attent op mogelijke materiële schade.



Advies en tips over hoe u beter kunt omgaan met uw toestel.

Problemen oplossen

Problemen en mogelijke oplossingen

Het geluid is zwak.

- Verhoog het volume.
 - Vervang of laad de lege batterij (afhankelijk van het batterijtype).
 - Reinig of verwissel het oorstukje.
-

Het hoortoestel maakt een fluitend geluid.

- Plaats het oorstukje opnieuw tot het stevig zit.
 - Verlaag het volume.
 - Reinig of verwissel het oorstukje.
-

Het geluid klinkt vervormd.

- Verlaag het volume.
 - Vervang of laad de lege batterij (afhankelijk van het batterijtype).
 - Reinig of verwissel het oorstukje.
-

Problemen en mogelijke oplossingen

Het hoortoestel geeft signaaltonen af.

- Vervang of laad de lege batterij (afhankelijk van het batterijtype).
-

Het hoortoestel werkt niet.

- Schakel het hoortoestel in.
 - Sluit de batterijlade voorzichtig helemaal.
 - Vervang of laad de lege batterij (afhankelijk van het batterijtype).
 - Controleer dat de batterij op de juiste manier is geplaatst.
 - De inschakelvertraging is actief.
Wacht enkele seconden en controleer opnieuw.
-

Neem contact op met uw audicien als u verdere problemen ondervindt.

Specifieke nationale informatie

Service en garantie

Serienummers	Hoortoestel	Luidspreker
---------------------	--------------------	--------------------

Links:

Rechts:

Servicedatums

1:	4:
----	----

2:	5:
----	----

3:	6:
----	----

Garantie

Datum aankoop:

Garantieperiode in maanden:

Uw audicien



Wettelijke fabrikant

Signia GmbH

Henri-Dunant-Strasse 100

91058 Erlangen

Duitsland

Telefoon: +49 9131 308 0

Geproduceerd door Signia GmbH

onder de handelsmerkllicentie van Siemens AG.

Document No. 02718-99T01-5400 NL

Order/Item No. 109 362 74

Master Rev02, 01.2016

© Signia GmbH, 02.2016



www.signia-hearing.com