

Pure primax

Käyttöohje



Hearing
Systems

SIEMENS

Sisältö

Tervetuloa	4
Kuulokojeesi	5
Kojeen tyyppi	5
Tutustuminen kuulokojeisiin	5
Osat ja nimet	6
Ohjaimet	8
Asetukset	11
Akut	13
Pariston koko ja vihjeitä käsittelyyn	13
Paristojen vaihtaminen	14
Uudelleenladattavien paristojen lataaminen uudelleen	15
Päivittäinen käyttö	16
Kytkeä päälle ja pois	16
Kuulokojeen asettaminen paikoilleen ja poistaminen	18
Äänenvoimakkuuden säätäminen	21
Toimintahjelmien vaihtaminen	22
Lisäsäätöjä (valinnainen)	22

Erityiset kuuntelutilanteet	23
Kohdistuksen (valinnainen) asettaminen	23
Puhelimessa	25
Induktiosilmukat	27
Huolto ja hoito	28
Kuulokojeet	28
Korvakappaleet	29
Ammattilaisen tekemä huolto	31
Lisätietoja	32
Langaton toiminto	32
Lisävarusteet	32
Tässä asiakirjassa käytetyt symbolit	33
Vianetsintä	33
Maakohtaiset tiedot	34
Huolto ja takuu	35

Tervetuloa

Kiitos, että valitsit kuulokojeemme käyttöösi elämäsi joka tilanteessa. Kuten minkä tahansa uuden asian kohdalla, sen käyttöön totuttelu saattaa viedä hetken.

Tämä opas kuulokojeasiantuntijasi tuen lisäksi auttaa sinua ymmärtämään edut ja paremman elämänlaadun, jonka kuulokojeesi voivat sinulle tarjota.

Saat parhaan hyödyn kuulokojeistasi, mikäli käytät niitä joka päivä koko päivän ajan. Tämän avulla niihin on helpompi tottua.



VAARA

On tärkeää lukea tämä käyttöohje ja turvakäyttöohje läpi huolellisesti ja kokonaan. Noudata turvaohjeita vahinkojen ja vammojen välttämiseksi.

Kuulokojeesi



Tässä käyttöohjeessa kuvaillaan valinnaisia ominaisuuksia, joita kuulokojeessasi saattaa olla tai ei ehkä ole.

Pyydä kuulokojeasiantuntijaasi ilmoittamaan ominaisuudet, jotka koskevat sinun kuulokojeettasi.

Kojeen tyyppi

Kuulokojeesi ovat RIC-mallia (vastaanotin korvakäytävässä). Vastaanotin asetetaan korvakäytävään ja kytketään kojeeseen vastaanotinkaapelilla. Kojeita ei ole tarkoitettu alle 3-vuotiaille lapsille tai henkilöille, joiden kehitystaso vastaa alle 3-vuotiaan lapsen tasoa.


Tutustuminen kuulokojeisiin

Suosittellemme sinua tutustumaan uusiin kuulokojeisiin perinpohjaisesti. Pidä kojeita kädessäsi ja kokeile ohjainten käyttöä, ja huomioi niiden sijainti kojeessa. Tämän ansiosta sinun on helpompi tunnustella ja painaa ohjaimia kuulokojeita käyttäessäsi.



Mikäli sinulla on vaikeuksia kuulokojeiden ohjainten painamisessa kojeita käyttäessäsi, voit kysyä kuulokojeasiantuntijaltasi kauko-ohjainvaihtoehdosta.

Osat ja nimet

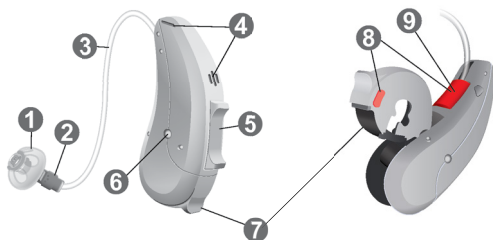

1 Korvakappale

2 Vastaanotin

3 Vastaanotinkaapeli

4 Mikrofonin aukot

5 Keinukytin
(vakio-ohjain),
painonappi tai ei
ohjainta (valinnainen)

6 Latausliitännät
(valinnaiset)

7 Paristolokero

8 Puolen ilmaisin
(punainen = oikea korva,
sininen = vasen korva)

9 Vastaanotinliitäntä

Voit käyttää vakioita tai yksilöllisesti muokattuja korvakappaleita.

Vakiokorvakappaleet

Koko

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| ☐ |  | Click Dome™ single
(avoin tai suljettu) |
| ☐ |  | Click Dome semi-open |
| ☐ |  | Click Dome double |

Vakiokorvakappaleet ovat helposti vaihdettavissa.
Lue lisää osasta "Huolto ja hoito".


Yksilöllisesti muokatut korvakappaleet

- | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------|
| ☐ |  | Yksilöllisesti muokattu kappale |
| ☐ |  | Click Mold™ |

Ohjaimet

Ohjaimilla voit esimerkiksi säätää äänenvoimakkuutta tai vaihtaa toimintaohjelmia. Kuulokojeissasi on joko painonappi tai keinukytkin - tai ei mitään ohjainta.

Kuulokojeasiantuntijasi on ohjelmoinut haluamasi toiminnot ohjaimiin.

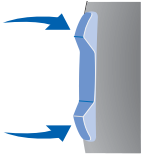Ohjain		Vasen	Oikea
Painonappi		☐	☐
Keinukytkin		☐	☐
Ei ohjainta		☐	☐



Voit käyttää myös kauko-ohjainta.

Painonapin toiminto	L	R
Paina lyhyesti:		
Ohjelman vaihtaminen	☐	☐
Lisää äänenvoimakkuutta	☐	☐
Vähemmän äänenvoimakkuutta	☐	☐
Tinnituksen hoitosignaalin tason nosto	☐	☐
Tinnituksen hoitosignaalin tason lasku	☐	☐
Paina pitkään:		
Valmiustila/päällekytkeminen	☐	☐

L = vasen, R = oikea

Keinukytkimen toiminto	L	R
Paina lyhyesti:		
Ohjelma ylös/alas	☐	☐
Äänenvoimakkuus ylös/alas	☐	☐
Tinnituksen hoitosignaalin tason nosto/lasku	☐	☐
Äänen tasapaino	☐	☐
Kohdistuksen valinta (tilaa koskevien asetusten määrittäminen)	☐	☐
Paina pitkään:		
Valmiustila/päällekytkeminen	☐	☐
Ohjelma ylös/alas	☐	☐
Paina erittäin pitkään:		
Valmiustila/päällekytkeminen	☐	☐

L = vasen, R = oikea

Asetukset

Tilanneohjelmat

1

2

3

4

5

6

Lue lisää osasta "Tilanneohjelmien vaihtaminen".

Ominaisuudet

- ☐ **Käynnistymisviive** mahdollistaa kuulokojeiden asettamisen paikalleen ilman viheltävää ääntä.
Lue lisää osasta "KytKentä päälle ja pois".
- ☐ **AutoPhone™** vaihtaa automaattisesti puhelinohjelmaan, kun puhelimen kuuloke lähestyy korvaa.
Lue lisää osasta "Puhelimessa".
- ☐ **TwinPhone** välittää puhelun molempiin korviin, kun puhelimen kuuloketta pidetään jommallakummalla korvalla.
Lue lisää osasta "Puhelimessa".
- ☐ **Tinnituksen hoitotoiminto** pitää ääntä, joka vie huomion tinnituksesta.
- ☐ **Latausliitännöillä** varustettujen kuulokojeiden paristot ladataan yksinkertaisesti asettamalla kojeet laturiin. Latauksen jälkeen laturi poistaa kosteuden kuulokojeista.
- ☐ **e2e wireless**-toiminto mahdollistaa molempien kuulokojeiden samanaikaisen ohjauksen.
Lue lisää osasta "Langaton toiminto".

Akut

Kun paristo on vähissä, ääni muuttuu heikommaksi tai kuulet hälytysäänimerkin. Riippuu paristotyypistä, kuinka pian paristo pitää vaihtaa uuteen tai ladata uudelleen.

Pariston koko ja vihjeitä käsittelyyn

Kysy kuulokojeasiantuntijaltasi suositeltuja paristoja.

Paristojen koko:	312
------------------	-----

- Käytä aina oikeankokoista paristoa kuulokojeillesi.
- Poista paristot, mikäli et aio käyttää kuulokojeita useaan päivään.
- Pidä aina varaparistoja mukanas.
- Poista tyhjät paristot välittömästi ja noudata paikallisia kierrätysmääräyksiä paristojen hävittämiseksi.

Paristojen vaihtaminen

Paristojen poistaminen:

- Avaa paristolokero.



- Vedä paristo ulos magneettitikun avulla. Magneettitikku on saatavilla lisävarusteena.



Pariston asettaminen paikoilleen:

- Mikäli paristossa on suojakalvo, poista se vasta sitten, kun olet valmis käyttämään paristoa.
- Aseta uusi paristo "+" -symboli ylöspäin (katso kuvaa).



- Sulje paristolokero huolellisesti. Mikäli tunnet vastusta, paristo ei ole asetettu paikoilleen oikein.

Älä yritä sulkea paristolokeroa voimaa käyttäen.
Se saattaa vaurioitua.

Uudelleenladattavien paristojen lataaminen uudelleen

Lataa ladattavat paristot ennen ensimmäistä käyttökertaa.

- Noudata laturin käyttöohjeessa olevia ohjeita paristojen lataamiseksi.

Usean uudelleenlataamiskerran jälkeen pariston käyttöikä saattaa vähentyä. Vaihda tässä tapauksessa uudelleenladattava paristo uuteen. Noudata sen osalta paristojen vaihtamisohjeita.

Päivittäinen käyttö

Kytkeä päälle ja pois

Sinulla on seuraavat vaihtoehdot kuulokojeittesi kytkemiseksi päälle tai pois päältä.

Paristolokeron kautta:

- Kytkeä päälle: Sulje paristolokero.

Oletusasetuksena oleva äänenvoimakkuus ja toimintaohjelma ovat asetettuina.

- Kytkeä pois päältä: Avaa paristokotelo ensimmäiseen pysäkkeeseen asti.

Latauksen jälkeen:

- Kytkeä päälle: Ota kojeet laturista.

Oletusasetuksena oleva äänenvoimakkuus ja toimintaohjelma ovat asetettuina.

Painonapilla tai keinukytkimellä:

- Kytkeä päälle ja pois päältä: Paina ja pidä painonappia tai keinukytkintä painettuna usean sekunnin ajan. Katso osa "Ohjaimet" omia ohjainasetuksiasi varten.

Päällekytkemisen jälkeen **aiemmin** käytössä ollut äänenvoimakkuus ja toimintaohjelma säilyvät asetettuina.

Kauko-ohjaimella:

- Noudata kauko-ohjaimen käyttöohjeen ohjeita.

Päällekytkemisen jälkeen **aiemmin** käytössä ollut äänenvoimakkuus ja toimintaohjelma säilyvät asettuina.

Kuulokojeita käytettäessä äänimerkki voi ilmoittaa, kun koje kytketään päälle tai pois päältä.

Kun **käynnistysviive** on otettu käyttöön, kuulokojeesi kytkeytyvät päälle usean sekunnin viiveen jälkeen. Tänä aikana voit asettaa kuulokojeesi paikoilleen korviisi joutumatta kokemaan epämiellyttävää vihellystä.

Kuulokojeasiantuntijasi voi kytkeä päälle "käynnistysviiveen".

Kuulokojeen asettaminen paikoilleen ja poistaminen

Kuulokojeesi on tarkasti viimeistelty oikealle ja vasemmalle korvalle erikseen.

Värilliset merkit ilmoittavat puolen:

- punainen merkki = oikea korva
- sininen merkki = vasen korva




Kuulokojeen asettaminen paikoilleen:

- ▶ Pidä vastanotinkaapelista kiinni kaarteesta, joka on lähempänä korvakappaletta.
- ▶ Työnnä korvakappale varovasti korvakäytävään **1**.
- ▶ Käännä sitä hieman, kunnes se istuu hyvin.

Avaa ja sulje suutasi ilman kerääntymisen välttämiseksi korvakäytävään.

- ▶ Nosta kuulokojetta ja liu'uta se korvasi yli **2**.

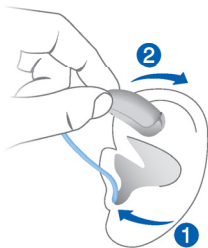

VAARA

Loukkaantumisvaara!

- ▶ Aseta korvakappale huolellisesti korvaan, mutta älä työnnä sitä liian syvälle.

i

- Saattaa olla helpointa asettaa **oikea** kuulokoke **oikealla** kädellä ja **vasen** kuulokoke **vasemmalla** kädellä.
- Mikäli sinulla on vaikeuksia korvakappaleen asettamisessa, vedä toisella kädelläsi kevyesti korvalehdestä alaspäin. Tämä avaa korvakäytävän ja helpottaa korvakappaleen paikoilleenasettamista.


Valinnainen kiinnike auttaa korvakappaleen pysymistä tukevasti korvassasi. Kiinnikkeen asettaminen:

- Taivuta kiinnikettä ja aseta se huolellisesti korvakuoppaan (katso kuvaa).



Kuulokojeen poistaminen:

- Nosta kuulokojetta ja liu'uta se korvasi yli **1**.
- Mikäli kuulokojeesi on varustettu yksilöllisesti muotoillulla korvakappaleella tai Click Moldilla, poista se vetämällä pienestä poistonarusta taaksepäin.
- Kaikki muut korvakappaleet: Tartu korvakanavassa olevasta vastaanottimesta kahdella sormella kiinni ja vedä se varovasti ulos **2**.

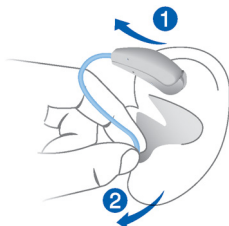

Älä vedä vastaanotinkaapelista.



VAARA

Loukkaantumisvaara!

- Erittäin harvoissa tapauksissa korvakappale saattaa jäädä korvaan kuulokojetta poistettaessa. Mikäli näin tapahtuu, poistata korvakappale terveydehoitoalan ammattilaisella.

Puhdista ja kuivaa kuulokojeesi käytön jälkeen.

Lue lisää osasta "Huolto ja hoito".

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Kuulokojeesi sovittavat äänenvoimakkuuden automaattisesti kuuntelutilanteeseen.

- Mikäli mieluummin säädät äänenvoimakkuuden käsin, paina painiketta tai keinukytintä tai käytä kauko-ohjainta.

Katso osa "Ohjaimet" omia ohjainasetuksiasi varten.

Valinnainen signaali voi ilmoittaa äänenvoimakkuuden muutoksen. Kun minimi- tai maksimiäänenvoimakkuus on saavutettu, saatat kuulla valinnaisen signaalin.

Toimintahjelmien vaihtaminen

Kuuntelutilanteesta riippuen kuulokojeesi säätävät ääntä automaattisesti.

Kuulokojeissasi saattaa olla myös useita erilaisia toimintaohjelmia, joissa voit itse muuttaa ääntä tarvittaessa. Valinnainen signaali voi ilmoittaa ohjelman vaihdon.

- Toimintaohjelma vaihdetaan painamalla painiketta tai keinukytintä tai käyttämällä kauko-ohjainta.

Katso osa "Ohjaimet" omia ohjainasetuksiasi varten.
Katso osasta "Asetukset" luettelo toimintaohjelmista.

i

Jos AutoPhone- tai TwinPhone-toiminto on käytössä, tilanneohjelma vaihtaa automaattisesti puhelinohjelmaan, kun puhelimen kuuloke on lähellä korvaa.

Lue lisää osasta "Puhelimessa".

Lisäsäätöjä (valinnainen)

Kuulokojeiden ohjaimilla voidaan myös muuttaa esimerkiksi äänen tasapainoa tai tinnituksen hoitotoiminnon tasoa. Äänen tasapainon avulla voit säätää bassoa ja diskanttia toiveittesi mukaisiksi.

Ohjeita asetusten säätämiseen on osassa "Ohjaimet".

Erityiset kuuntelutilanteet

Kohdistuksen (valinnainen) asettaminen

Mikäli haluat keskittyä suoraan edessäsi olevaan keskustelukumppaniin tai mikäli haluat kuunnella ympäristöä laajemmin, tilaa koskevien asetusten määrittimen avulla voit hallita kuuntelukokemustasi.

Voit valita eri tasoja – "kohdistus etuasentoon" (vasen kuva) tai "keskiasento" (keskimmäinen kuva) tai "kuule joka puolelta" (oikea kuva).



Edellytykset:

- Sinulla on oltava käytössä kaksi kuulokojetta.
- Kuulokojeasiantuntijan on asetettava toisen kuulokojeesi keinukytkin tilaa koskevien asetusten määrittimelle.

Katso osa "Ohjaimet" keinukytkimen asetusta varten.

Sopivalla älypuhelimien sovelluksella saat vieläkin useampia hallintavaihtoehtoja.

Kohdistuksen asettaminen manuaalisesti:

- ▶ Mikäli sinulla on useita toimintaohjelmia, vaihda toimintaohjelmaan 1.
- ▶ Paina keinukytintä, joka on asetettu tälle toiminnolle. Keskitaso on aktiivinen oletusasetuksena.
- ▶ Paina ylempää keinukytintä kohdistaksesi kuuntelua enemmän eteenpäin tai alempaa keinukytintä kuunnellaksesi ympäristöä laajemmin.

Tämä toiminto on tarkoitettu erityisiä ja hetkellisiä kuuntelutilanteita varten. Näin ollen kuulokojeet palaavat automaattisesti ohjelman 1 automaattiasetukseen, mikäli ääniympäristö muuttuu merkittävästi tai noin 45 minuutin kuluttua. Voit myös poistua tilaa koskevasta asetusten määritintilasta.

Poistuminen tilaa koskevasta asetusten määritintilasta:

- ▶ Vaihda minimi- ja maksimitasoon.
Valinnainen signaali voi ilmoittaa minimi- tai maksimitason.
- ▶ Vaihda yhden asennon verran eteenpäin.
Tällöin kuuluu sama signaali kuin toimintaohjelmaa vaihdettaessa, joka ilmoittaa, että olet poistunut tilaa koskevien asetusten määritintilasta.

Puhelimessa

Kun olet puhelimessa, pidä puhelimen kuuloketta hieman korvasi yläpuolella. Kuulokojeen ja puhelimen kuulokkeen on oltava kohdistettuina toisiinsa. Käännä kuuloketta hieman siten, että korva ei ole täysin peitossa.



Puhelinohjelma

Saatat haluat käyttää tiettyä äänenvoimakkuutta puhelinta käyttäessäsi. Pyydä kuulokojeasiantuntijaasi määrittämään puhelinohjelmasi asetukset.

- Vaihda puhelinohjelmaan aina, kun olet puhelimessa tai käytä automaattista ohjelmanvaihdinta.

Mikäli puhelinohjelma tai automaattinen ohjelmanvaihdin määritetty kuulokojeellesi, se näkyy osassa "Asetukset".

Automaattinen ohjelmanvaihto (AutoPhone tai TwinPhone)

Kuulokojeesi voi **automaattisesti** valita puhelinohjelman, kun tuot puhelimen kuulokkeen lähelle kuulokojeettasi. TwinPhone jopa lähettää puhelun molempiin korviin. Kun olet lopettanut puhelun, siirrä kuuloke pois kuulokojeen luota, niin mikrofonitila palaa käyttöön.

Jos haluat käyttää tätä toimintoa, pyydä kuulokojeasiantuntijaasi

- aktivoimaan AutoPhone- tai TwinPhone-toiminto
- tarkistamaan puhelinvastaanottimen magneettikenttä.

Automaattista ohjelmanvaihtoa varten kuulokojeesi havaitsee puhelinvastaanottimen magneettikentän. Kaikki puhelimet eivät tuota riittävän voimakasta magneettikenttää toiminnon aktivoimiseksi. Tässä tapauksessa voit käyttää AutoPhone-magneettia, joka on saatavilla lisävarusteena, ja kiinnittää sen puhelinvastaanottoimeen.

Katso AutoPhone-magneetin käyttöohjeesta ohjeet magneetin asettamiseksi.



HUOMAA

Käytä vain hyväksyttyä AutoPhone-magneettia. Kysy kuulokojeasiantuntijaltasi tätä lisävarustetta.

Induktiosilmukat

Monissa puhelimissa ja julkisissa tiloissa, kuten teattereissa, on käytettävissä audiosignaali (musiikki ja puhe) induktiosilmukan kautta. Tämän järjestelmän avulla kuulokojeesi voivat suoraan vastaanottaa halutun signaalin – ilman ympäristön häiritsevää melua.

Induktiosilmukkajärjestelmät ovat tavallisesti merkitty tietyillä merkeillä.



Pyydä kuulokojeasiantuntijaasi määrittämään puhelinkelaohjelmasi asetukset.

- Vaihda puhelinkelaohjelmaan aina, kun olet sellaisessa paikassa, jossa on induktiosilmukka.

Se, onko puhelinkelaohjelmaa määritetty kuulokojeellesi, näkyy osassa "Asetukset".

Puhelinkelaohjelma ja kauko-ohjain



HUOMAA

Kojeet, joissa on langaton yhteys:

Kun puhelinkelaohjelma on käytössä, kauko-ohjain saattaa aiheuttaa sykäyksittäistä ääntä.

- Käytä kauko-ohjainta vain yli 10 cm (4 tuuman) etäisyydellä.

Huolto ja hoito

Vaurioiden ehkäisemiseksi on tärkeää pitää huolta kuulokojeista ja noudattaa muutamia perussääntöjä, joista muodostuu nopeasti jokapäiväinen tapa.

Kuulokojeet

Kuivaus ja säilytys

- ▶ Kuivaa kuulokojeesi yön aikana.
- ▶ Kysy lisätietoja kuulokojeasiantuntijaltasi suositeltavista kuivaustuotteista.
- ▶ Säilytä kuulokojeitasi paristolokero auki ja paristot poistettuina kuivausjärjestelmässä kosteuden aiheuttamien haittavaikutusten estämiseksi, mikäli kojeet ovat pidemmän aikaa pois käytöstä.

Puhdistus

Kuulokojeissasi on suojapinnoite. Mikäli kuulokojeita ei kuitenkaan puhdisteta säännöllisesti, saatat vaurioittaa niitä tai aiheuttaa vahinkoa itsellesi.

- ▶ Puhdista kuulokojeesi päivittäin pehmeällä, kuivalla nenäliinalla.
- ▶ Älä koskaan käytä juoksevaa vettä tai upota kojeita veteen.
- ▶ Älä koskaan paina voimakkaasti puhdistuksen aikana.
- ▶ Kysy kuulokojeasiantuntijaltasi suositelluista puhdistustuotteista, erityishoitovälineistä ja lisätietoja siitä, kuinka voit pitää kuulokojeesi hyvässä kunnossa.



Korvakappaleet


Puhdistus

Korvakappaleisiin saattaa kertyä korvavahaa. Tämä saattaa vaikuttaa äänen laatuun. Puhdista korvakappale päivittäin.

Kaikki muuntyyppiset korvakappaleet:

- Puhdista korvakappale heti sen poistamisen jälkeen pehmeällä ja kuivalla nenäliinalla.

Tämä estää korvavahan muuttumisen kuivaksi ja kovaksi.

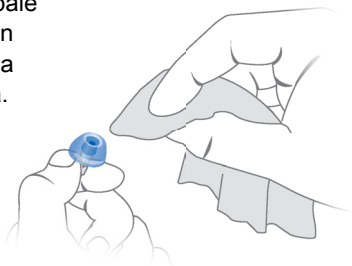

Click Domes:lle:

- Purista tipin kärkeä.




Vaihtaminen

Vaihda vakiokorvakappaleet noin kolmen kuukauden välein. Vaihda ne jo aikaisemmin, mikäli huomaat murtumia tai muita muutoksia. Vakiokorvakappaleiden vaihtamistoimenpide riippuu korvakappaleen tyypistä. Katso osasta "Osat ja nimet" korvakappaleesi tyyppi, jonka kuulokojeasiantuntijasi on sinne merkinnyt.

Click Domes -tippien vaihtaminen

Mikäli vanhan Click Domen vaihtamisen kanssa on ongelmia, käytä irrotustyökalua tai noudata Click Domes-pakkauksen ohjeita:

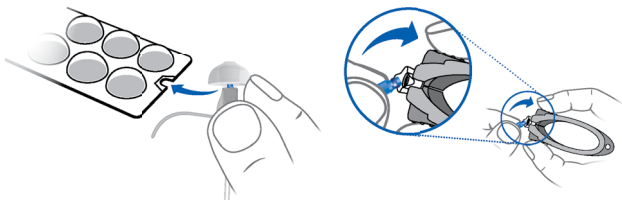

Irrotustyökalu on saatavilla lisävarusteena.

- Huolehdi erityisesti, että uusi Click Dome napsahtaa selvästi paikoilleen.



Ammattilaisen tekemä huolto

Kuulokojeasiantuntijasi voi tehdä läpikotaisen, ammattimaisen puhdistuksen ja huollon.

Yksilöllisesti muokatut korvakappaleet ja vahasuojat tulee vaihdattaa ammattilaisella tarpeen mukaan.

Pyydä kuulokojeasiantuntijaltasi yksilöllistä suositusta huoltoväleistä ja neuvoja.

Lisätietoja

Langaton toiminto

Kuulokojeesi on varustettu langattomalla toiminnolla. Se tarjoaa kahden kuulokojeesi välisen synkronointitoiminnon:

- Jos muutat toisen kojeen ohjelmaa tai äänenvoimakkuutta, myös toinen muuttuu automaattisesti.
- Kumpikin kuulokoje mukautuu automaattisesti kuuntelutilanteeseen samanaikaisesti.

Langaton toiminto kauko-ohjauksen käytön.

Lisävarusteet

Saatavilla olevat lisävarusteet riippuvat kojeen tyypistä. Esimerkkejä tällaisista ovat: kauko-ohjain, audiostreaming-laite tai älypuhelimien sovellus kauko-ohjausta varten.

Jotkin kuulokojeet tukevat CROS- ja BiCROS -ratkaisuja henkilöille, joiden kuurous on yksipuolista.

Kysy lisätietoja kuulokojeasiantuntijaltasi.

Tässä asiakirjassa käytetyt symbolit



Ilmoittaa tilanteesta, joka saattaa johtaa vakaviin, keskivaikeisiin tai pieniin vammoihin.



Ilmoittaa mahdollisesta omaisuusvahingosta.



Neuvoja ja vihjeitä kojeen parempaan käsittelyyn.

Vianetsintä

Ongelma ja mahdolliset ratkaisut

Ääni on heikko.

- Lisää äänenvoimakkuutta.
 - Vaihda tyhjä paristo uuteen tai lataa se (pariston tyypistä riippuen).
 - Puhdista tai vaihda korvakappale.
-

Kuulokoje päästää viheltävää ääntä.

- Aseta korvakappale uudelleen paikoilleen, kunnes se istuu hyvin.
 - Vähennä äänenvoimakkuutta.
 - Puhdista tai vaihda korvakappale.
-

Ääni on vääristynyt.

- Vähennä äänenvoimakkuutta.
 - Vaihda tyhjä paristo uuteen tai lataa se (pariston tyypistä riippuen).
 - Puhdista tai vaihda korvakappale.
-

Ongelma ja mahdolliset ratkaisut

Kuulokoje päästää signaaliäänä.

- Vaihda tyhjä paristo uuteen tai lataa se (pariston tyyppistä riippuen).
-

Kuulokoje ei toimi.

- Kytke kuulokoje päälle.
 - Sulje paristolokero kokonaan varovasti.
 - Vaihda tyhjä paristo uuteen tai lataa se (pariston tyyppistä riippuen).
 - Varmista, että paristo on asetettu paikoilleen oikein.
 - Käynnistysviive on käytössä.
Odota usean sekunnin ajan ja tarkista uudelleen.
-

Ota yhteyttä kuulokojeasiantuntijaasi, mikäli muita ongelmia ilmenee.

Maakohtaiset tiedot

Huolto ja takuu

Sarjanumerot	Instrumentti	Vastaanotinyksikkö
--------------	--------------	--------------------

Left (vasen):		
---------------	--	--

Right (oikea):		
----------------	--	--

Huoltopäivämäärät

1:	4:
----	----

2:	5:
----	----

3:	6:
----	----

Takuu

Ostopäivämäärä:

Takuuaika kuukausina:

Kuulokojeasiantuntijasi



Laillinen valmistaja

Signia GmbH

Henri-Dunant-Strasse 100

91058 Erlangen

Saksa

Puh. +49 9131 308 0

Valmistaja

Signia GmbH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkkilisenssillä.

Document No. 02718-99T01-7300 FI

Order/Item No. 109 362 79

Master Rev02, 01.2016

© Signia GmbH, 02.2016

