

Pure primax

Lietošanas instrukcija



Hearing
Systems

SIEMENS

Satura rādītājs

Ievads	4
Dzirdes aparāti	5
Aparāta veids	5
Dzirdes aparāta darbības principu apgūšana	5
Komponenti un nosaukumi	6
Vadības elementi	8
Iestatījumi	11
Baterijas	13
Baterijas izmērs un padomi par tās izmantošanu	13
Bateriju nomainīšana	14
Uzlādējamo bateriju uzlāde	15
Ikdienas lietošana	16
Ieslēgšana un izslēgšana	16
Dzirdes aparātu ievietošana un izņemšana	18
Skaļuma regulēšana	21
Dzirdes programmas maiņa	22
Papildu regulēšana (izvēles)	22
Īpašas dzirdamības situācijas	23
Fokusa iestatīšana (izvēles)	23
Tālruņa izmantošana	25
Audio indukcijas cilpas	27

Uzturēšana un apkope	28
Dzirdes aparāti	28
Ausu ieliktni	29
Profesionāla apkope	31
Papildinformācija	32
Bezvadu sakaru funkcionalitāte	32
Piederumi	32
Šajā dokumentā izmantotie simboli	33
Problēmu novēršana	33
Konkrētai valstij paredzēta informācija	34
Apkope un garantija	35

levads

Pateicamies, ka izvēlējāties mūsu dzirdes aparātus, kas jūs tagad pavadīs ikdienas gaitās. Tāpat kā ar visu jauno, arī šo aparātu iepazīšana prasīs nedaudz laika.

Šī rokasgrāmata un jūsu dzirdes aprūpes speciālista sniegtais atbalsts palīdzēs jums izprast, kādas priekšrocības un kvalitatīvākas iespējas dzīvē nodrošina dzirdes aparāti.

Lai iegūtu maksimālo labumu no dzirdes aparātiem, ieteicams tos valkāt nepārtraukti katru dienu. Tas ļauj jums pierast pie tiem.



UZMANĪBU

Ir svarīgi rūpīgi un pilnībā iepazīties ar šo lietotāja rokasgrāmatu un drošības instrukcijām. Lai nepieļautu aparāta bojājumus vai traumu rašanos, ievērojiet drošības instrukcijas.

Dzirdes aparāti



Lietotāja rokasgrāmatā ir aprakstītas papildu funkcijas, kuras jūsu dzirdes aparātiem varētu būt vai arī nebūt.

Lai noteiktu, kuras funkcijas der jūsu dzirdes aparātiem, sazinieties ar savu dzirdes aprūpes speciālistu.

Aparāta veids

Jūsu dzirdes aparāts ir kanāla iekšauss dzirdes aparāta (Receiver-in-Canal — RIC) modelis. Uztvērējs tiek ievietots auss kanālā un savienots ar aparātu, izmantojot uztvērēja vadu. Aparāti nav paredzēti lietošanai bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem, kā arī personām, kuru attīstības vecums ir mazāks par 3 gadiem.


Dzirdes aparāta darbības principu apgūšana

Ieteicams iepazīties ar jaunā dzirdes aparāta darbības principiem. Paņemot aparātu rokā, mēģiniet izmantot vadības elementus un ievērojiet to atrašanās vietu. Tas atvieglos vadības elementu atrašanu un izmantošanu dzirdes aparāta lietošanas laikā.



Ja dzirdes aparātu izmantošanas laikā rodas problēmas ar vadības elementu nospiešanu, varat jautāt dzirdes aprūpes speciālistam par tālvadības pults izmantošanas iespējām.

Komponenti un nosaukumi

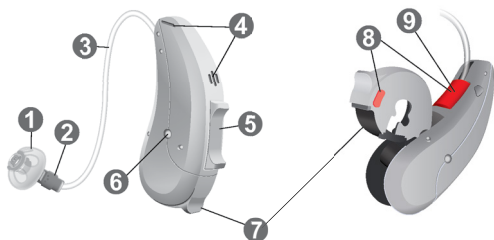

-
- | | |
|---|--|
| 1 Auss ieliktnis | 6 Uzlādes kontakti (izvēles) |
| 2 Uztvērējs | 7 Baterijas nodalījums |
| 3 Uztvērēja vads | 8 Puses apzīmējums (sarkans = labā auss, zils = kreisā auss) |
| 4 Mikrofona atveres | 9 Uztvērēja savienojums |
| 5 Taustiņslēdzis (standarta vadības elements), spiedpoga vai bez vadības elementiem (izvēles) | |
-

Jūs varat izmantot standarta vai pielāgotus ausu ieliktņus.

Standarta ausu ieliktņi	Izmērs
☐ Click Dome™ atsevišķs (atvērts vai aizvērts)	
☐ Click Dome pusatvērts	
☐ Click Dome divkāšs	



Standarta ausu ieliktņus var viegli nomainīt.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet sadaļu
“Uzturēšana un apkope”.

Pielāgoti ausu ieliktņi	
☐ Pielāgots korpuss	
☐ Click Mold™	

Vadības elementi

Izmantojot vadības elementus, varat regulēt skaļumu vai pārslēgt dzirdes programmas. Dzirdes aparāti ir aprīkoti ar spiedpogu vai taustiņslēdzi vai arī tiem nav neviena vadības elementa.

Dzirdes aprūpes speciālists vadības elementiem ir ieprogrammējis vēlamās funkcijas.

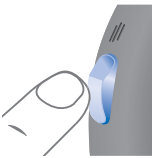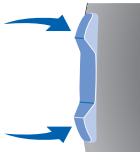Vadības elements		Kreisais	Labais
Spiedpoga		☐	☐
Taustiņslēdzis		☐	☐
Bez vadības elementa		☐	☐



Varat izmantot arī tālvadības pulti.

Spiedpogas funkcija	L	R
Viegli piespiest:		
Programmas maiņa	☐	☐
Skaļuma līmeņa palielināšana	☐	☐
Skaļuma līmeņa samazināšana	☐	☐
Tinīta terapijas signāla līmeņa palielināšana	☐	☐
Tinīta terapijas signāla līmeņa samazināšana	☐	☐
Ilgstoši piespiest:		
Gaidstāve/ieslēgšana	☐	☐
L = kreisais, R = labais		

Taustiņslēdža funkcijas	L	R
Viegli piespiest:		
Pārvietošanās pa programmām uz augšu/uz leju	☐	☐
Skaļuma palielināšana/samazināšana	☐	☐
Tiņģa terapijas signāla līmeņa palielināšana/samazināšana	☐	☐
Skaņas līdzsvars	☐	☐
Fokusa izvēle (telpiskuma konfigurēšanas rīks)	☐	☐
Ilgstoši piespiest:		
Gaidstāve/ieslēgšana	☐	☐
Pārvietošanās pa programmām uz augšu/uz leju	☐	☐
Piespiest ļoti ilgi:		
Gaidstāve/ieslēgšana	☐	☐
L = kreisais, R = labais		

Iestatījumi

Dzirdes programmas

1

2.

3

4

5

6

Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet sadaļu
Dzirdes programmas maiņa.

Funkcijas

- ☐ Izmantojot **ieslēgšanas atlikšanu**, dzirdes aparātu var ievietot ausī, izvairoties no skaņas traucējumiem.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet sadaļu “Ieslēgšana un izslēgšana”.

- ☐ Ja tālruni tuvina ausi, dzirdes aparāts **AutoPhone™** automātiski pārslēdzas uz tālruņa programmu.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet sadaļu “Tālruņa izmantošana”.

- **TwinPhone** pārraida tālruņa zvanu abās ausīs, ja tālruni tur pie vienas auss.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet sadaļu “Tālruņa izmantošana”.
- **Tinīta terapijas funkcija** rada skaņu, kas novērš jūsu uzmanību no tinīta.
- Lai uzlādētu dzirdes aparātu, kas aprīkoti ar **uzlādes kontaktiem**, baterijas, vienkārši ievietojiet aparātus lādētājā. Pēc uzlādes lādētājs izvada mitrumu no dzirdes aparātiem.
- Funkcionalitāte **e2e wireless** nodrošina abu dzirdes aparātu vienlaicīgu regulēšanu.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet sadaļu “Bezvadu funkcionalitāte”.

Baterijas

Ja baterijas uzlādes līmenis ir zems, skaņa kļūs vājāka vai tiks atskaņots brīdinājuma signāls. No baterijas veida ir atkarīgs, pēc cik ilga laika baterija ir jānomaina vai jāuzlādē.

Baterijas izmērs un padomi par tās izmantošanu

Ieteikumus par piemērotajām baterijām lūdziet savam dzirdes aprūpes speciālistam.

Baterijas izmērs:	312
-------------------	-----

- Dzirdes aparātos jāizmanto pareizā izmēra baterijas.
- Ja plānojat dzirdes aparātus neizmantot vairākas dienas, izņemiet baterijas.
- Vienmēr nēsājiet līdzi rezerves baterijas.
- Tukšas baterijas nekavējoties izņemiet un, lai veiktu to galējo utilizāciju, ievērojiet vietējos otrreizējā pārstrādes noteikumus.

Bateriju nomaiņa

Baterijas izņemšana

- Atveriet bateriju nodalījumu.



- Lai bateriju izņemtu, izmantojiet magnētu. Magnēts ir pieejams kā piederums.



Baterijas ievietošana

- Ja baterijai ir aizsargpārklājums, noņemiet to, kad baterija ir jāizmanto.



- Ievietojiet bateriju, simbolu "+" vēršot uz augšu (skatīt attēlu).



- Rūpīgi aizveriet bateriju nodalījumu. Ja sajūtat pretestību, baterija nav ievietota pareizi.

Nemēģiniet aizvērt bateriju nodalījumu ar spēku.
Tādējādi tas var tikt bojāts.

Uzlādējamo bateriju uzlāde

Pirms pirmās lietošanas reizes uzlādējiet uzlādējamās baterijas.

- Lai uzlādētu baterijas, ievērojiet lādētāja lietošanas instrukcijas.

Pēc daudziem uzlādes cikliem var samazināties baterijas izmantošanas laiks. Šādā gadījumā nomainiet uzlādējamo bateriju ar jaunu. Lai to paveiktu, ievērojiet bateriju nomaiņas norādījumus.

Ikdienas lietošana

Ieslēgšana un izslēgšana

Ir pieejamas tālāk minētās dzirdes aparātu ieslēgšanas vai izslēgšanas iespējas.

Izmantojot baterijas nodaļījumu

- ▶ Ieslēgšana. Aizveriet bateriju nodaļījumu.
Tiks iestatīts **noklusējuma** skaļuma līmenis un dzirdes programma.
- ▶ Izslēgšana. Atveriet bateriju nodaļījumu līdz pirmajam aizturim.

Pēc uzlādes

- ▶ Ieslēgšana. Izņemiet aparātus no lādētāja.
Tiks iestatīts **noklusējuma** skaļuma līmenis un dzirdes programma.

Izmantojot spiedpogu vai taustiņslēdzi

- ▶ Ieslēgšana vai izslēgšana. Nospiediet spiedpogu vai taustiņslēdzi un turiet to nospiestu vairākas sekundes. Lai iegūtu informāciju par vadības elementu iestatījumiem, skatiet sadaļu "Vadības elementi".
Pēc ieslēgšanas saglabājas **iepriekš** izmantotā skaļuma līmeņa un dzirdes programmas iestatījums.

Izmantojot tālvadības pulti

- Ievērojiet tālvadības pults lietošanas instrukcijā atrodamos norādījumus.

Pēc ieslēgšanas saglabājas **iepriekš** izmantotā skaļuma līmeņa un dzirdes programmas iestatījums.

Lietojot dzirdes aparātus, to ieslēgšanu vai izslēgšanu var norādīt brīdinājuma signāls.

Ja ir aktivizēta **ieslēgšanas atlikšana**, dzirdes aparāti tiek ieslēgti ar vairāku sekunžu aizkavi. Šajā laikā varat ievietot dzirdes aparātus ausīs bez nepatīkamas fona skaņas.

Ieslēgšanas atlikšanu var aktivizēt dzirdes aprūpes speciālists.

Dzirdes aparātu ievietošana un izņemšana

Jūsu dzirdes aparāti ir precīzi noregulēti labajai un kreisajai ausij. Krāsu marķieri norāda pusi:

- sarkans marķieris = labā auss;
- zils marķieris = kreisā auss.




Dzirdes aparāta ievietošana

- ▶ Turiet uztvērēja vadu auss ieliktnim tuvākajā saliekuma vietā.
- ▶ Uzmanīgi iebīdīet auss ieliktni auss kanālā ①.
- ▶ Nedaudz pakustiniet ieliktni, līdz tas pareizi pieguļ.

Lai nepieļautu gaisa uzkrāšanos auss kanālā, atveriet un aizveriet muti.

- ▶ Paceliet dzirdes aparātu un bīdīet to pāri auss augšpusei ②.

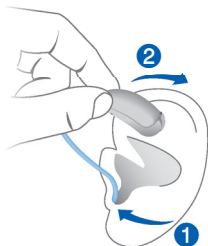

UZMANĪBU

Savainojumu risks!

- ▶ Uzmanīgi un ne pārāk dziļi ievietojiet ausī auss ieliktni.

i

- Ieteicams ievietojiet **labo** dzirdes aparātu ar **labo** roku un **kreiso** aparātu ar **kreiso** roku.
- Ja auss ieliktnā ievietošana rada problēmas, izmantojiet otru roku, lai uzmanīgi pavilktu auss līpiņu uz leju. Šādi tiks atvērts auss kanāls un atvieglota auss ieliktnā ievietošana.

Papildu auss gliemežnīcas fiksators atvieglo drošu auss ieliktnā iestiprināšanu ausī.


Gliemežnīcas fiksatora novietošana

- Salieciet gliemežnīcas fiksatoru un uzmanīgi ielieciet to auss gliemežnīcas apakšējā daļā (skatīt attēlu).



Dzirdes aparāta izņemšana

- ▶ Paceliet dzirdes aparātu un bīdiet to pāri auss augšpusei ①.
- ▶ Ja jūsu dzirdes aparāts ir aprīkots ar pielāgotu gliemežnīcu vai Click Mold, lai to izņemtu, velciet mazo izņemšanas vadu pakauša virzienā.
- ▶ Visu citu ausu ieliktnu gadījumā satveriet auss kanālā esošo uztvērēju ar diviem pirkstiem un uzmanīgi izvelciet to ārā ②.

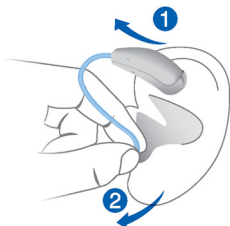

Nevelciet uztvērēja vadu.



UZMANĪBU

Savainojumu risks!

- ▶ Ļoti retos gadījumos auss ieliktnis, izņemot dzirdes aparātu, var palikt ausī. Ja tas tā notiek, ļaujiet auss ieliktni izņemt medicīnas speciālistam.

Pēc dzirdes aparātu lietošanas notīriet tos un ļaujiet tiem nožūt. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet sadaļu “Uzturēšana un apkope”.

Skaļuma regulēšana

Skaļuma līmenis dzirdes aparātos tiek regulēts automātiski atbilstoši klausīšanās apstākļiem.

- Ja vēlaties regulēt skaļumu manuāli, īsi nospiediet spiedpogu vai taustiņslēdzi vai izmantojiet tālvadības pulti.

Lai iegūtu informāciju par vadības elementu iestatījumiem, skatiet sadaļu “Vadības elementi”.

Skaļuma līmeņa maiņu var norādīt papildu signāls. Kad tiks sasniegts maksimālais vai minimālais skaļuma līmenis, jūs dzirdēsiet papildu skaņas signālu.

Dzirdes programmas maiņa

Atkarībā no dzirdamības situācijas, dzirdes aparāti automātiski pielāgo savu skaņu.

Iespējams, ka jūsu dzirdes aparāti ir aprīkoti ar vairākām dzirdes programmām, kas ļauj mainīt skaņu, ja nepieciešams. Programmas maiņu var norādīt papildu signāls.

- Lai mainītu dzirdes programmu, nospiediet spiedpogu, taustiņslēdzi vai izmantojiet tālvadības pulti.

Lai iegūtu informāciju par vadības elementu iestatīšanu, skatiet sadaļu “Vadības elementi”. Dzirdes programmu sarakstu skatiet sadaļā “Iestatījumi”.



Ja ir aktivizēta funkcija AutoPhone vai TwinPhone, tuvinot tālruni ausij, dzirdes programma automātiski tiek pārslēgta uz tālruņa programmu.

Plašāku informāciju skatiet sadaļā “Tālruņa izmantošana”.

Papildu regulēšana (izvēles)

Tāpat dzirdes aparāta vadības elementus var izmantot, lai mainītu, piemēram, skaņas līdzsvaru vai tinīta terapijas signāla līmeni. Izmantojot skaņas līdzsvaru, varat regulēt zemās un augstās skaņas frekvences, kā nepieciešams.

Lai iegūtu informāciju par vadības elementu iestatīšanu, skatiet sadaļu “Vadības elementi”.

Īpašas dzirdamības situācijas

Fokusa iestatīšana (izvēles)

Ja vēlaties koncentrēties tieši uz jūsu sarunu partneri, kas atrodas jums pretī, vai ja vēlaties dzirdēt plašākas apkārtnes skaņas, telpiskuma konfigurēšanas rīks ļauj jums kontrolēt klausīšanās preferences.

Varat atlasīt dažādus līmeņus, piemēram, “fokuss uz skaņu priekšā” (attēls pa kreisi), “centrāla pozīcija” (attēls centrā) vai “skaņas visapkārt” (attēls pa labi).



Priekšnosacījumi

- Jums jāvalkā abi dzirdes aparāti.
- Jūsu dzirdes aprūpes speciālistam viens dzirdes aparāta taustiņslēdzis jāiestata telpiskuma konfigurēšanas rīka režīmā.

Lai iegūtu informāciju par taustiņslēdža iestatīšanu, skatiet sadaļu “Vadības elementi”.

Izmantojot piemērotu viedtālruna aplikāciju, jums ir pieejamas vēl citas vadības opcijas.

Fokusa manuāla iestatīšana

- ▶ Ja izmantojat vairākas dzirdes programmas, ieslēdziet 1. dzirdes programmu.
- ▶ Nospiediet šai funkcijai iestatīto taustiņslēdzi.
Pēc noklusējuma ir aktivizēts vidējais līmenis.
- ▶ Lai koncentrētos vairāk uz skaņu jums priekšā, nospiediet augšējo taustiņslēdzi vai apakšējo taustiņslēdzi, lai dzirdētu plašākas apkārtnes skaņas.

Šo funkciju ir paredzēts izmantot īpašās vai īslaicīgas klausīšanās situācijās. Tādējādi, ja skaņas vide būtiski mainās vai ja ir pagājušas aptuveni 45 minūtes, dzirdes aparāti automātiski atgriežas automātiskajā 1. programmas iestatījuma režīmā. Jūs varat arī iziet no telpiskuma konfigurēšanas rīka režīma.

Telpiskuma konfigurēšanas rīka režīma izslēgšana

- ▶ Pārslēdzieties uz minimālo vai maksimālo līmeni.
Pārslēgšanos uz minimālo vai maksimālo līmeni var norādīt papildu skaņas signāls.
- ▶ Pārslēdzieties vēl vienu līmeni tālāk.
Tiek atskaņots tas pats skaņas signāls, kas liecina par dzirdes programmas pārslēgšanu, norādot, ka telpiskuma konfigurēšanas rīka režīms ir izslēgts.

Tālruņa izmantošana

Runājot pa tālruni, turiet tālruņa uztvērēju nedaudz virs auss. Dzirdes aparātam un tālruņa uztvērējam jāatrodas vienā līmenī. Nedaudz pagriežiet uztvērēju, lai auss netiktu pilnībā aizsegta.



Tālruņa programma

Izmantojot tālruni, iespējams, vēlēšities lietot noteiktu skaļuma līmeni. Lūdziet, lai dzirdes aprūpes speciālists konfigurē tālruņa programmu.

- Pārslēdziet dzirdes aparātu uz tālruņa programmu ikreiz, kad izmantojat tālruni, vai lietojiet automātisko programmas pārslēgu.

Lai uzzinātu, vai dzirdes aparātā ir konfigurēta tālruņa programma vai automātiskais programmas pārslēgs, skatiet sadaļu “Iestatījumi”.

Automātiskais programmas slēdzis (AutoPhone vai TwinPhone)

Ja turat tālruņa uztvērēju dzirdes aparāta tuvumā, dzirdes aparāts var **automātiski** atlasīt tālruņa programmu. TwinPhone pārraida zvanu arī uz abām ausīm. Kad beidzat runāt pa tālruni, attāliniet tālruņa uztvērēju no dzirdes aparāta un mikroфона režīms tiks atiestatīts.

Ja vēlaties izmantot šo funkciju, lūdziet, lai dzirdes aprūpes speciālists veic šādas darbības:

- aktivizēt funkciju AutoPhone vai TwinPhone;
- pārbaudīt tālruņa uztvērēja magnētisko lauku.

Izmantojot automātisko programmas pārslēgu, dzirdes aparāts noteiks tālruņa uztvērēja magnētisko lauku. Ne visi tālruņi rada pietiekami stipru magnētisko lauku, lai aktivizētu šo funkciju. Šādā gadījumā varat izmantot AutoPhone magnētu, kas pieejams kā piederums, un piestiprināt to tālruņa uztvērējam.

Lai iepazītos ar magnēta novietošanas instrukcijām, skatiet AutoPhone magnēta lietotāja rokasgrāmatu.



NORĀDĪJUMS

Izmantojiet tikai apstiprinātu AutoPhone magnētu. Jautājiet to savam dzirdes aprūpes speciālistam.

Audio indukcijas cilpas

Dažos tālruņos, kā arī sabiedriskās vietās, piemēram, teātros, tiek nodrošināts audio signāls (mūzika un runa), izmantojot audio indukcijas cilpu. Izmantojot šo sistēmu, dzirdes aparāti var tieši uztvert vēlamo signālu bez apkārtējās vides trokšņiem.

Audio indukcijas cilpas sistēmas parasti tiek norādītas ar noteiktām zīmēm.



Lūdziet, lai dzirdes aprūpes speciālists konfigurē indukcijas spoles programmu.

- Ja atrodaties vietā, kur rodas audio indukcijas cilpa, pārslēdzieties uz indukcijas spoles programmu.

Lai uzzinātu, vai dzirdes aparātā ir konfigurēta indukcijas spoles programma, skatiet sadaļu “Iestatījumi”.

Indukcijas spoles programma un tālvadības pults



NORĀDĪJUMS

Aparātiem ar bezvadu savienojuma režīmu:
Ja ieslēgta attālās spoles programma, tālvadības pults var radīt pulsējošu troksni.

- Lietojiet tālvadības pulti, ne tuvāk par 10 cm (4 collām) no uztveršanas avota.

Uzturēšana un apkope

Lai nepieļautu bojājumus, svarīgi ir rūpēties par dzirdes aparātiem un ievērot dažus pamatnosacījumus, kas ātri iekļausies jūsu ikdienas ritmā.

Dzirdes aparāti

Žāvēšana un uzglabāšana

- ▶ Ļaujiet, lai dzirdes aparāts pa nakti nožūst.
- ▶ Lai iegūtu informāciju par ieteicamajiem žāvēšanas produktiem, sazinieties ar dzirdes aprūpes speciālistu.
- ▶ Ja dzirdes aparāti netiek ilgstoši lietoti, uzglabājiet tos žāvēšanas sistēmā ar atvērtu baterijas nodaļījumu un izņemtām baterijām, lai nepieļautu nelabvēlīgu mitruma ietekmi.

Tīrīšana

Dzirdes aparāti ir pārklāti ar aizsargpārklājumu. Tomēr, ja dzirdes aparāti netiek regulāri tīrīti, var rasties to bojājumu vai miesas bojājumu gūšanas risks.

- ▶ Tīriet dzirdes aparātus katru dienu ar mīkstu, sausu salveti.
- ▶ Nekādā gadījumā neizmantojiet krāna ūdeni vai neiemērciet ierīci ūdenī.
- ▶ Nekādā gadījumā tīrīšanas laikā nespiediet ierīci.



- Lai iegūtu informāciju par ieteicamajiem tīrīšanas produktiem, īpašiem apkopes komplektiem vai papildu norādījumiem par dzirdes aparātu uzturēšanu labā tehniskā stāvoklī, sazinieties ar dzirdes aprūpes speciālistu.

Ausu ieliktni


Tīrīšana

Uz auss ieliktniem var sakrāties ausu sērs (cerumen). Tas var ietekmēt skaņas kvalitāti. Tīriet auss ieliktnus katru dienu.

Jebkura tipa auss ieliktni

- Notīriet auss ieliktni tūlīt pēc izņemšanas ar mīkstu un sausu salveti.

Tādējādi netiek pieļauts, ka ausu sērs izžūst un sakalst.

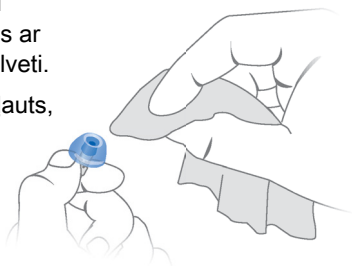

Izmantojot Click Domes

- Saspiediet uzgaļa galu.




Nomaiņa

Nomainiet standarta ausu ieliktņus aptuveni ik pēc trīs mēnešiem. Ja pamanāt plaisas vai citas izmaiņas, nomainiet tos ātrāk. Standarta ausu ieliktņu nomaiņas procedūra ir atkarīga no auss ieliktņa veida. Sadaļā “Komponenti un nosaukumi” dzirdes aprūpes speciālists ir atzīmējis jūsu ausu ieliktņu veidu.

Click Domes nomaiņa

Ja veco ausu ieliktņu Click Dome izņemšana ir apgrūtināta, izmantojiet izņemšanas rīku vai izpildiet norādījumus uz ausu ieliktņu Click Domes iepakojuma.

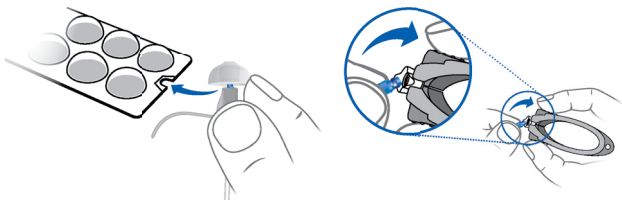

Izņemšanas rīks pieejams kā piederums.

- Pievērsiet īpašu uzmanību, lai jaunie ausu ieliktņi Click Dome ar klikšķi fiksējas paredzētajā vietā.



Profesionāla apkope

Dzirdes aprūpes speciālists var nodrošināt rūpīgu profesionāli veiktu tīrīšanu un apkopi.

Pielāgotu ausu ieliktņu un ausu sēra filtru nepieciešamo nomaiņu jāveic speciālistam.

Lūdziet dzirdes aprūpes speciālistam informāciju par jums ieteicamajiem individuālajiem apkopes intervāliem un par atbalstu.

Papildinformācija

Bezvadu sakaru funkcionalitāte

Jūsu dzirdes aparāti ir aprīkoti ar bezvadu sakaru funkcionalitāti. Tā nodrošina jūsu abu dzirdes aparātu sinhronizēšanu.

- Ja nomaināt programmu vai skaļumu uz viena aparāta, arī otrs tiek nomainīts automātiski.
- Abi dzirdes aparāti vienlaicīgi automātiski pielāgojas dzirdamības situācijai.

Bezvadu sakaru funkcionalitāte ļauj lietot tālvadības pulti.

Piederumi

Pieejamo piederumu veids ir atkarīgs no aparāta veida. Piemēram: tālvadības pults, audio straumēšanas ierīce vai tālvadības pults viedtālruņa aplikācija.

Daži dzirdes aparātu veidi atbalsta CROS un BiCROS risinājumus cilvēkiem, kuri ir nedzirdīgi ar vienu ausi.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, konsultējieties ar jūsu dzirdes aprūpes speciālistu.

Šajā dokumentā izmantotie simboli



Norāda situāciju, kas var radīt nopietnus, vidējus vai nelielus savainojumus.



Norāda uz iespējamu īpašuma bojājumu.



Ieteikumi un padomi rūpīgākai ierīces lietošanai.

Problēmu novēršana

Problēma un iespējamie risinājumi

Nepietiekama skaņa.

- Palieliniet skaļuma līmeni.
 - Nomainiet vai uzlādējiet tukšo bateriju (atkarīgs no baterijas veida).
 - Notīriet vai nomainiet auss ieliktni.
-

Dzirdes aparātā ir dzirdami svilpjoši trokšņi.

- Atkārtoti ievietojiet auss ieliktni, līdz tas stabili pieguļ.
 - Samaziniet skaļuma līmeni.
 - Notīriet vai nomainiet auss ieliktni.
-

Skaņa ir izkropļota.

- Samaziniet skaļuma līmeni.
 - Nomainiet vai uzlādējiet tukšo bateriju (atkarīgs no baterijas veida).
 - Notīriet vai nomainiet auss ieliktni.
-

Problēma un iespējamie risinājumi

Dzirdes aparātā ir dzirdami signāla toņi.

- Nomainiet vai uzlādējiet tukšo bateriju (atkarīgs no baterijas veida).
-

Dzirdes aparāts nedarbojas.

- Ieslēdziet dzirdes aparātu.
 - Uzmanīgi pilnībā aizveriet bateriju nodalījumu.
 - Nomainiet vai uzlādējiet tukšo bateriju (atkarīgs no baterijas veida).
 - Pārliedziniet, ka baterija ir pareizi ievietota.
 - Ir aktivizēta ieslēgšanas atlikšana. Uzgaidiet dažas sekundes un pārbaudiet vēlreiz.
-

Ja rodas citas problēmas, sazinieties ar dzirdes aprūpes speciālistu.

Konkrētai valstij paredzēta informācija

Apkope un garantija

Sērijas numuri	Aparāts	Uztvērēja ierīce
-----------------------	----------------	-------------------------

Kreisā puse:		
--------------	--	--

Labā puse:		
------------	--	--

Apkopes datumi

1:	4:
----	----

2:	5:
----	----

3:	6:
----	----

Garantija

legādes datums:

Garantijas periods mēnešos:

Jūsu dzirdes aprūpes speciālists



Likumīgais ražotājs

Signia GmbH

Henri-Dunant-Strasse 100

91058 Erlangen

Vācija

Tālr. +49 9131 308 0

Izgatavoja Signia GmbH

saskaņā ar Siemens AG preču zīmes licenci..

Document No. 02718-99T01-8W00 LV

Order/Item No. 109 362 85

Master Rev02, 01.2016

© Signia GmbH, 02.2016

