

Pure primax

Naudotojo vadovas



Hearing
Systems

SIEMENS

Turinys

Ižanga	4
Jūsų klausos aparatai	5
Prietaiso tipas	5
Susipažinimas su klausos aparatu	5
Sudedamosios dalys ir pavadinimai	6
Valdikliai	8
Nuostatos	11
Maitinimo elementai	13
Patarimai dėl maitinimo elementų dydžio ir naudojimo	13
Elementų keitimas	14
Įkraunamų maitinimo elementų įkrovimas	15
Kasdienis naudojimas	16
Įjungimas ir išjungimas	16
Klausos aparatų uždėjimas ir nuėmimas	18
Garsumo nustatymas	21
Klausos programos keitimas	22
Kiti reguliuojami nustatymai (pasirinktinai)	22
Ypatingos klausymosi sąlygos	23
Orientacijos nustatymas (pasirinktinai)	23
Kalbant telefonu	25
Garso indukcinės kilpos	27

Techninis aptarnavimas ir priežiūra	28
Klausos aparatai	28
Į ausį kišamos dalys	29
Specialistų atliekama techninė priežiūra	31
Tolesnė informacija	32
Belaidžio ryšio funkcijos	32
Priedai	32
Šio dokumento simboliai	33
Trikčių diagnostika	33
Su šalimi susijusi informacija	34
Techninė priežiūra ir garantija	35

Ižanga

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų klausos aparatus savo kasdieniam gyvenimui palengvinti. Kaip ir įsigijus bet kokią kitą naują dalyką, prireiks šiek tiek laiko, kol su jais susipažinsite.

Naudodamiesi šiuo vadovu bei padedant jūsų klausos specialistui suprasite, kokių privalumų gali suteikti klausos aparatai ir kaip jie gali pagerinti gyvenimo kokybę.

Kad iš savo klausos aparatų gautumėte daugiausia naudos, rekomenduojama, kad nešiotumėte juos kasdien, visą dieną. Tai padės prie jų įprasti.



PERSPĖJIMAS

Svarbu atidžiai ir iki galo perskaityti šį naudotojo vadovą bei saugos instrukciją. Kad išvengtumėte sužalojimų ir nesugadintumėte prietaisų, vadovaukitės saugos informacija.

Jūsų klausos aparatai



Šiame naudotojo vadove aprašytos pasirenkamos funkcijos, kurios gali būti jūsų klausos aparate (arba jų gali nebūti).

Paprašykite savo klausos priežiūros specialisto nurodyti jūsų klausos aparato turimas funkcijas.

Prietaiso tipas

Jūsų klausos aparatai yra su įlandiniu garsiakalbiu (RIC). Imtuvas yra įdedamas į ausies kanalą ir sujungiamas su prietaisu imtuvo laidu. Aparatai nėra skirti vaikams iki 3 metų amžiaus ar asmenims, kurių išsivystymo amžius yra mažesnis nei 3 metai.


Susipažinimas su klausos aparatu

Rekomenduojame susipažinti su savo naujuoju klausos aparatu. Laikydami aparatą rankose bandykite naudoti valdiklius ir atkreipkite dėmesį, kurioje aparato vietoje jie yra. Dėl to, kai nešiosite klausos aparatą, valdiklius galėsite apčiuopti ir paspausti lengviau.



Jeigu nešiojant klausos aparatą jums sudėtinga spaudinėti valdiklius, galite pasiteirauti savo klausos specialisto apie galimybę naudoti nuotolinio valdymo pultelį.

Sudedamosios dalys ir pavadinimai

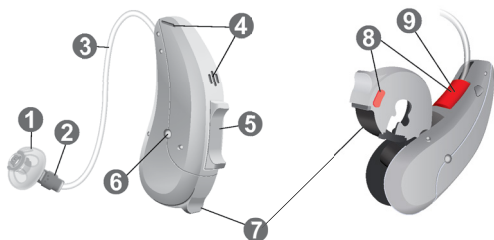

1 Į ausį kišama dalis

2 Imtuvas

3 Imtuvo laidas

4 Mikrofono angos

5 Klavišinis jungiklis
(standartinis valdiklis),
paspaudžiamasis
mygtukas arba jokio
valdiklio (pasirinktinai)

6 Įkrovimo kontaktai
(pasirinktinai)

7 Maitinimo elemento
skyrius

8 Pusės indikatorius
(raudonas = dešinioji ausis,
mėlynas = kairioji ausis)

9 Imtuvo jungtis

Galite naudoti standartines arba pagal užsakymą pagamintas į ausį kišamas dalis.

Standartinės į ausį kišamos dalys		Dydis
☐		Click Dome™ viengubas (atvirojo arba uždarojo tipo)
☐		Click Dome pusiau atvirojo tipo
☐		Click Dome dvigubas



Standartinės į ausį kišamas dalis galite lengvai pakeisti. Daugiau skaitykite skyriuje „Techninis aptarnavimas ir priežiūra“.

Pagal užsakymą pagamintos į ausį kišamos dalys	
☐	 Pritaikytasis įdėklas
☐	 Click Mold™

Valdikliai

Valdikliais galite, pavyzdžiui, reguliuoti garsumą arba perjunginėti klausos programas. Klausos aparate gali būti paspaudžiamas mygtukas ar klavišinis jungiklis arba nebūti jokio valdiklio.

Klausos priežiūros specialistas užprogramavo valdikliams jūsų pageidautas funkcijas.

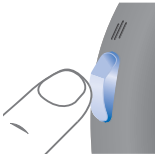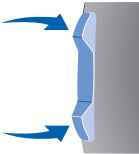Valdiklis		Kairysis	Dešinysis
Paspaudžiamasis mygtukas		☐	☐
Klavišinis jungiklis		☐	☐
Valdiklio nėra		☐	☐



Taip pat galite naudoti nuotolinio valdymo pultelį.

Paspaudžiamojo mygtuko funkcija	L	R
Paspauskite trumpai:		
Programos keitimas	☐	☐
Garsumo didinimas	☐	☐
Garsumo mažinimas	☐	☐
Ūžesio terapijos signalo lygio didinimas	☐	☐
Ūžesio terapijos signalo lygio mažinimas	☐	☐
Paspauskite ilgai:		
Budėjimo rež. / įjungimas	☐	☐

L – kairė, R – dešinė

Klavišinio jungiklio funkcijos	L	R
Paspauskite trumpai:		
Programa aukštyn / žemyn	☐	☐
Garsumo didinimas / mažinimas	☐	☐
Ūžesio terapijos signalo lygio didinimas / mažinimas	☐	☐
Garso balansas	☐	☐
Židinio pasirinkimas (erdvinė konfigūracija)	☐	☐
Paspauskite ilgai:		
Budėjimo rež. / įjungimas	☐	☐
Programa aukštyn / žemyn	☐	☐
Paspauskite labai ilgai:		
Budėjimo rež. / įjungimas	☐	☐

L – kairė, R – dešinė

Nuostatos

Klausos programos

1

2

3

4

5

6

Daugiau skaitykite skyriuje „Klausos programos keitimas“.

Funkcijos

- ☐ Pasirinkus funkciją **įjungimo delsa**, dedant klausos aparatą į ausį negirdimi švilpimo garsai.

Daugiau skaitykite skyriuje
„Įjungimas ir išjungimas“.

- ☐ **AutoPhone™** pridėjus prie ausies telefono ragelį, automatiškai įjungia kalbėjimo telefonu programą.

Daugiau skaitykite skyriuje „Kalbėjimas telefonu“.

- ☐ **TwinPhone** kai telefono imtuvas laikomas prie bet kurios ausies, telefono skambutis perduodamas į abi ausis.

Daugiau skaitykite skyriuje „Kalbėjimas telefonu“.

- **Ūžesio terapijos funkcija** sukuria garsą, kad ūžesys jūsų nebevargintų.
- Norėdami įkrauti klausos aparatų maitinimo elementus per **įkrovimo kontaktus**, tiesiog įdėkite aparatus į kroviklį. Kai klausos aparatai bus įkrauti, įkroviklis pašalins iš jų drėgmę.
- **e2e wireless** funkcija leidžia vienu metu valdyti abu klausos aparatus.

Daugiau skaitykite skyriuje „Belaidžio ryšio funkcijos“.

Maitinimo elementai

Kai maitinimo elementas senka, garsas tampa silpnesnis arba pasigirsta įspėjamasis signalas. Nuo maitinimo elemento tipo priklauso, kada reikės jį pakeisti ar įkrauti.

Patarimai dėl maitinimo elementų dydžio ir naudojimo

Apie rekomenduojamus maitinimo elementus teiraukitės savo klausos specialisto.

Maitinimo elementų dydis:

312

- Klausos aparatams visada naudokite tinkamo dydžio maitinimo elementus.
- Jeigu nenaudosite klausos aparatų keletą dienų, išimkite maitinimo elementus.
- Su savimi visada turėkite atsarginių maitinimo elementų.
- Iškvotus maitinimo elementus nedelsdami išimkite ir išmeskite laikydamiesi vietinių atliekų perdirbimo taisyklių.

Elementų keitimas

Maitinimo elemento išėmimas:

- ▶ Atidarykite maitinimo elemento skyrių.



- ▶ Ištraukite maitinimo elementą, naudodami magnetinę lazdelę. Magnetinę lazdelę galima įsigyti kaip priedą.



Maitinimo elemento įdėjimas:

- ▶ Jei maitinimo elementas yra su apsaugine plėvele, ją nuimkite tik tada, kai būsite pasirengę naudoti maitinimo elementą.
- ▶ Įdėkite maitinimo elementą taip, kad „+“ simbolis būtų nukreiptas aukštyn (žr. paveikslėlį).



- ▶ Atsargiai uždarykite maitinimo elemento skyrių. Jei jaučiate pasipriešinimą, maitinimo elementas įdėtas neteisingai.

Maitinimo elemento skyriaus nebandykite uždaryti naudodami jėgą. Galite jį sulaužyti.

Įkraunamų maitinimo elementų įkrovimas

Prieš naudodami įkraunamus maitinimo elementus pirmą kartą, juos įkraukite.

- Įkraukite maitinimo elementus vadovaudamiesi įkroviklio naudojimo vadove pateiktais nurodymais.

Po daugelio pakartotinio įkrovimo ciklų gali sutrumpėti maitinimo elemento naudojimo trukmė. Tokiu atveju pakeiskite įkraunamą maitinimo elementą nauju.

Norėdami tai padaryti vadovaukitės maitinimo elementų keitimo nurodymais.

Kasdienis naudojimas

Ijungimas ir išjungimas

Klausos aparatus įjungti ir išjungti galite toliau nurodytais būdais.

Naudojant maitinimo elemento skyrių

- ▶ Įjungimas Uždarykite maitinimo elemento skyrių.
Nustatomas **numatytasis** garsumas ir klausos programa.
- ▶ Išjungimas Atidarykite maitinimo elemento skyrių iki pirmo sklėsčio.

Įkrovus:

- ▶ Įjungimas išimkite instrumentus iš įkroviklio.
Nustatomas **numatytasis** garsumas ir klausos programa.

Naudojant paspaudžiamąjį mygtuką arba klavišinį jungiklį:

- ▶ Įjungimas ir išjungimas: Paspaudžiamąjį mygtuką arba klavišinį jungiklį nuspauskite ir palaikykite kelias sekundes. Apie savo valdiklių nustatymus žr. skyriuje „Valdikliai“.

Įjungus nustatomas **paskutinįjį kartą** naudotas garsumas ir klausos programa.

Naudodami nuotolinio valdymo pultelį:

- Vadovaukitės nuotolinio valdymo pultelio naudotojo vadove pateiktais nurodymais.

Ijungus nustatomas **paskutinį kartą** naudotas garsumas ir klausos programa.

Galite pasirinkti, kad būtų girdimas signalas, kai nešiojant klausos aparataus jis įjungiamas arba išjungiamas.

Ijungus funkciją **Power-on delay** (įjungimo delsa), klausos aparatai įsijungia tik po kelių sekundžių. Per tą laiką įsidedant į ausis klausos aparatus nėra nemalonaus švilpimo garso.

Funkciją „Power-on delay“ (įjungimo delsa) gali įjungti klausos specialistas.

Klausos aparatų uždėjimas ir nuėmimas

Jūsų klausos aparatai yra sureguliuoti kairiajai ir dešiniajai ausims. Spalvotomis žymėmis nurodytos pusės:

- raudona žymė = dešinioji ausis,
- mėlyna žymė = kairioji ausis.




Klausos aparato įdėjimas:

- ▶ Laikykite imtuvo laidą už linkio arčiau į ausį kišamos dalies.
- ▶ Į ausį kišamą dalį atsargiai įstumkite į ausies kanalą ①.
- ▶ Švelniai pasukite, kol ji bus įdėta tinkamai.

Išsižiokite ir susičiaupkite, kad ausies kanale nesusikauptų oro.

- ▶ Kilstelėkite klausos aparatą ir slinkdami nuimkite jį nuo ausies viršutinės dalies ②.

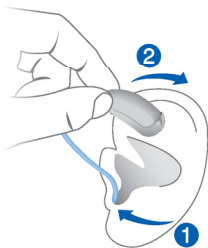

PERSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti!

- ▶ Ausies antgalį kiškite į ausį atsargiai, ne per giliai.

i

- Gali būti patogiau **dešinijį** klausos aparatą dėti **dešiniaja** ranka, o **kairijį** – **kairiaja**.
- Jei dedant į ausį įkišamą dalį kyla sunkumų, kita ranka švelniai patempkite ausies spenelį žemyn. Ausies kanalas taps atviresnis ir įdėti į ausį įkišamą dalį bus lengviau.


Papildomas fiksatorius naudojamas į ausį įkišamai daliai ausyje įtvirtinti. Norėdami nustatyti fiksatoriaus padėtį, darykite taip:

- Sulenkite fiksatorių ir atsargiai įstatykite jį į ausies įdubos dugną (žr. paveikslėlį).



Klausos aparato išėmimas:

- ▶ Kilstelėkite klausos aparatą ir slinkdami nuimkite jį nuo ausies viršutinės dalies ❶.
- ▶ Jeigu naudojate klausos aparatą su pritaikytu įdėklų arba Click Mold, jį išimkite traukdami link pakaušio už mažo išimti skirto laidelio.
- ▶ Naudodami bet kokias kitas į ausį kišamas dalis: ausies kanale esantį imtuvą suimkite dviem pirštais ir atsargiai ištraukite ❷.

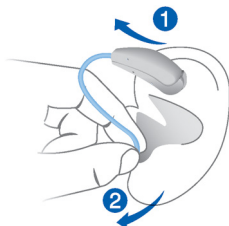

Netraukite imtuvo laido.



PERSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti!

- ▶ Labai retais atvejais išimant klausos aparatą ausies antgalis gali likti ausyje. Taip nutikus kreipkitės į medicinos specialistą, kad jis ištrauktų ausies antgalį.

Panaudotus klausos aparatus nuvalykite ir nudžiovinkite. Daugiau skaitykite skyriuje „Techninis aptarnavimas ir priežiūra“.

Garsumo nustatymas

Klausos aparatai automatiškai nustato garsumą pagal klausymosi sąlygas.

- Jeigu pageidaujate reguliuoti garsumą rankiniu būdu, trumpai spauskite paspaudžiamąjį mygtuką ar klavišinį jungiklį arba naudokitės nuotolinio valdymo pulteliu.

Apie savo valdiklių nustatymus žr. skyriuje „Valdikliai“.

Galima pasirinkti, kad keičiant garsumą būtų girdimas signalas. Pasiekus didžiausią arba mažiausią garsumą, girdėsite pasirenkamo tono signalą.

Klausos programos keitimas

Priklausomai nuo klausymosi sąlygų, jūsų klausos aparatai automatiškai sureguliuoja garsą.

Jūsų klausos aparatuose taip pat gali būti kelios klausos programos, kuriomis, prireikus, galite keisti garsą.

Galima pasirinkti, kad keičiant programą būtų girdimas signalas.

- Jei norite pakeisti klausos programą, spauskite paspaudžiamąjį mygtuką ar klavišinį jungiklį arba naudokitės nuotolinio valdymo pulteliu.

Apie savo valdiklių nustatymus žr. skyriuje „Valdikliai“.
Klausos programų sąrašą žr. skyriuje „Nuostatos“.



Jeigu įjungta AutoPhone arba TwinPhone funkcija, pridėjus prie ausies telefono ragelį klausos programa automatiškai parenkama kalbėjimo telefonu programa.

Daugiau informacijos žr. skyriuje „Kalbant telefonu“.

Kiti reguliuojami nustatymai (pasirinktinai)

Klausos aparatų valdikliais taip pat galima keisti, pvz., garso balansą arba užesio terapijos signalo lygį. Keičiant garso balansą, pagal jūsų poreikius reguliuojami žemi ir aukšti dažniai.

Apie savo valdiklių nustatymus žr. skyriuje „Valdikliai“.

Ypatingos klausymosi sąlygos

Orientacijos nustatymas (pasirinktinai)

Jei norite labiau susitelkti ties priešais esančiu pašnekovu arba jei norite klausytis platesnės aplinkos – erdvės konfigūravimo įrenginys leis pasirinkti pageidaujamą nuostatą.

Galite pasirinkti iš skirtingų lygių – nuo orientacijos į priekinę padėtį (paveikslas kairėje), į vidurio padėtį (paveikslas viduryje) arba klausytis visko aplinkui (paveikslas dešinėje).



Būtinios sąlygos:

- Reikia užsidėti abu klausos aparatus.
- Jūsų klausos priežiūros specialistas turi nustatyti ant vieno klausos aparato esantį klavišinį jungiklį taip, kad veiktų erdvės konfigūravimo įrenginys.

Apie klavišinio valdiklio nustatymą žr. skyriuje „Valdikliai“.

Naudodamiesi tinkama išmaniojo telefono programėle, turėsite dar daugiau valdymo galimybių.

Orientacijos nustatymas rankiniu būdu:

- ▶ jei turite kelias klausos programas, įjunkite 1 klausos programą;
- ▶ paspauskite klavišinį jungiklį, nustatytą šiai funkcijai.
Vidutinis lygis yra aktyvus pagal numatytąją nuostatą;
- ▶ paspauskite viršutinį klavišinį jungiklį, kad susitelktumėte ties priekio padėtimi arba apatinį klavišinį jungiklį, kad galėtumėte klausytis platesnės aplinkos.

Ši funkcija skirta specifinėms ir laikinoms klausymosi sąlygoms. Klausos aparatai automatiškai grįžta į automatinį 1 programos nustatymą, jei garso aplinka reikšmingai pasikeičia arba maždaug po 45 minučių. Be to, galite išeiti iš erdvės konfigūravimo įrenginio režimo.

Jei norite išeiti iš erdvės konfigūravimo įrenginio režimo:

- ▶ perjunkite į mažiausią ar didžiausią lygį.
Galima pasirinkti, kad pasiekus mažiausią ir didžiausią lygį būtų girdimas signalas;
- ▶ perjunkite dar vieną pakopą.
Paleidžiamas to paties tono signalas, kaip keičiant klausos programą, nurodantis, kad išėjote iš erdvės konfigūravimo įrenginio režimo.

Kalbant telefonu

Kalbėdami telefonu laikykite telefono ragelį šiek tiek virš ausies. Klausos aparatas ir telefono ragelis turi būti vienodame aukštyje. Ragelį šiek tiek pasukite, kad ausis nebūtų visiškai uždengta.



Kalbėjimo telefonu programa

Gali būti, kad kalbėdami telefonu norėsite kitokio garsumo lygio. Paprašykite savo klausos specialisto, kad sukonfigūruotų kalbėjimo telefonu programą.

- Kas kartą kalbėdami telefonu įsijunkite kalbėjimo telefonu programą arba naudokitės automatinio programos perjungimo funkcija.

Ar jūsų klausos aparatams sukonfigūruota kalbėjimo telefonu programa arba automatinio programos perjungimo funkcija, nurodyta skyriuje „Nuostatos“.

Automatinis programos perjungimas (AutoPhone arba TwinPhone)

Jūsų klausos aparatas gali **automatiškai** parinkti kalbėjimo telefonu programą, kai laikote telefono ragelį prie klausos aparato. TwinPhone netgi perduoda skambučius į abi ausis. Baigę kalbėti telefonu, ragelį atitraukite nuo klausos aparato ir mikrofono režimas atsistatys.

Jei norite naudotis šia funkcija, paprašykite savo klausos specialisto:

- Įjungti funkciją AutoPhone arba TwinPhone.
- Patikrinti telefono ragelio magnetinį lauką.

Pasirinkus automatinį programos perjungimą, jūsų klausos aparatas aptinka telefono ragelio magnetinį lauką. Ne visi telefonai skleidžia pakankamai stiprų magnetinį lauką, kad būtų įjungta ši funkcija. Tokiu atveju galite naudoti AutoPhone magnetą (galima įsigyti atskirai kaip priedą), pritvirtindami jį prie telefono ragelio.

Instrukcijų, kaip įdėti magnetą, žr. AutoPhone magneto naudotojo instrukcijose.



PASTABA

Naudokite tik patvirtintą AutoPhone magnetą. Norėdami įsigyti šį priedą kreipkitės į klausos priežiūros specialistą.

Garso indukcinės kilpos

Kai kuriuose telefonuose ir viešosiose vietose, pvz., teatruose, galima garso signalo (muzikos arba kalbos) per garso indukcinę kilpą paslauga. Naudojant šią sistemą klausos aparatai tiesiogiai priima pageidaujamą signalą, bet aplinkos garsas neiškraipomas.

Jeigu naudojama garso indukcinės kilpos sistema, apie tai dažniausiai informuojama atitinkamais ženklais.



Paprašykite savo klausos specialisto, kad sukonfigūruotų teleritės programą.

- Kas kartą būdami ten, kur yra garso indukcinė kilpa, įsijunkite teleritės programą.

Skyriuje „Nuostatos“ nurodyta, ar jūsų klausos aparatui sukonfigūruota teleritės programa.

Teleritės programa ir nuotolinio valdymo pultelis



PASTABA

Skirta tik belaidžio ryšio funkciją turintiems aparatams:

suaktyvinus indukcinės ritės (teleritės) programą, dėl nuotolinio valdymo pultelio gali būti girdimas ritmingas garsas.

- Naudokite nuotolinio valdymo pultelį didesniu nei 10 cm (4 col.) atstumu.

Techninis aptarnavimas ir priežiūra

Siekiant išvengti žalos, svarbu klausos aparatus prižiūrėti ir laikytis kelių pagrindinių taisyklių, kurios greitai taps jūsų kasdienės rutinos dalimi.

Klausos aparatai

Džiovinimas ir laikymas

- ▶ Leiskite savo klausos aparatui nudžiūti per naktį.
- ▶ Kreipkitės į savo klausos specialistą dėl rekomenduojamų džiovinimo skirtų gaminių.
- ▶ Kad apsaugotumėte klausos aparatus nuo drėgmės poveikio, kai jų nenaudojate ilgesnį laiką, laikykite juos džiovinimo sistemoje, atidarę maitinimo elementų skyrių ir išėmę maitinimo elementus.

Valymas

Klausos aparatai yra padengti apsaugine danga. Vis dėlto, jei nevalysite reguliariai, galite sugadinti klausos aparatus arba susižaloti.

- ▶ Klausos aparatus valykite kasdien, švelniai ir sausu audiniu.
- ▶ Niekada neplaukite po tekančiu vandeniu ir nepamirškite prietaisų į vandenį.
- ▶ Valydami niekada nespauskite.
- ▶ Kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą dėl rekomenduojamų valymo produktų, specialiųjų priežiūros rinkinių ir išsamesnės informacijos, kaip išlaikyti klausos aparatus tinkamos būklės.



Į ausį kišamos dalys


Valymas

Ant į ausį kišamų dalių gali susikaupti ausų sieros. Dėl to gali suprastėti garso kokybė. Į ausį kišamas dalis valykite kasdien.

Naudodami bet kokio tipo į ausį kišamas dalis:

- Išėmę į ausį kišamas dalis, nedelsdami nuvalykite jas minkštu ir sausu audiniu.

Taip ausų sierra neprisidžius.

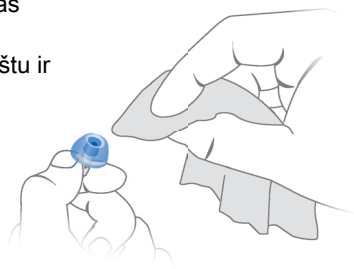

Skirta Click Domes:

- Suspauskite kupolo galiuką.




Keitimas

Standartines į ausį kišamas dalis keiskite maždaug kas tris mėnesius. Jei pastebėsite įtrūkimų ar kitų pokyčių, pakeiskite anksčiau. Standartinių į ausį kišamų dalių keitimo procedūra priklauso nuo į ausį kišamos dalies tipo. Skyriuje „Sudedamosios dalys ir pavadinimai“ jūsų klausos specialistas pažymėjo jūsų naudojamą į ausį kišamos dalies tipą.

Click Domes keitimas

Jei sunku nuimti seną Click Dome, naudokitės nuėmimo įrankiu arba vadovaukitės ant Click Domes pakuotės esančiomis instrukcijomis:

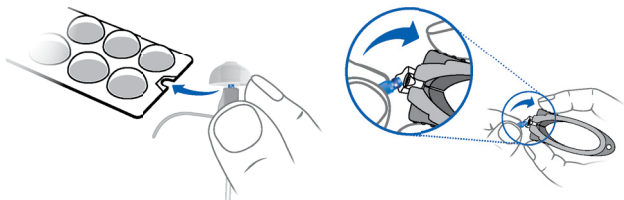

Nuėmimo įrankį galima įsigyti kaip priedą.

- Pasirūpinkite, kad naujasis Click Dome tikrai užsifikuotų reikiamoje padėtyje.



Specialistų atliekama techninė priežiūra

Jūsų klausos specialistas gali kruopščiai ir profesionaliai išvalyti jūsų klausos aparatus ir atlikti techninę priežiūrą.

Pagal užsakymą pagamintas į ausį kišamas dalis ir ausų sieros filtrus prireikus turi keisti specialistas.

Pasiteiraukite savo klausos specialisto, kokios būtų jūsų asmeninės rekomendacijos dėl techninės priežiūros intervalų ir pagalbos.

Tolesnė informacija

Belaidžio ryšio funkcijos

Jūsų klausos aparatuose yra belaidžio ryšio funkcijos. Taip vykdoma sinchronizacija tarp jūsų dviejų klausos aparatų.

- Jei viename aparate pakeisite garsumą arba programą, automatiškai tai pasikeis ir kitame aparate.
- Abu klausos aparatai prie klausymosi sąlygų automatiškai prisitaiko vienu metu.

Belaidžio ryšio funkcija leidžia naudoti nuotolinio valdymo pultelį.

Priedai

Galimų priedų tipas priklauso nuo prietaiso tipo. Pavyzdžiai: nuotolinio valdymo pultas, garso transliavimo įrenginys arba valdyti nuotoliniu būdu skirta išmaniojo telefono programėlė.

Kai kurių tipų klausos aparatai palaiko CROS ir BiCROS sprendimus, skirtus žmonėms, kuriems yra vienpusis kurtumas.

Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į klausos priežiūros specialistą.

Šio dokumento simboliai



Nurodoma situacija, dėl kurios gali įvykti sunkių, vidutinio sunkumo arba nedidelių sužalojimų.



Įspėjama apie galimą nuosavybės žalą.



Informacija ir patarimai, kaip tinkamai naudoti prietaisą.

Trikčių diagnostika

Problema ir galimi sprendimai

Silpnas garsas.

- Pagarsinkite.
 - Įkraukite išseikvotą maitinimo elementą arba įdėkite naują (priklausomai nuo maitinimo elemento tipo).
 - Nuvalykite arba pakeiskite į ausį kišamą dalį.
-

Klausos aparatas skleidžia švilpimo garsus.

- Įdėkite į ausį kišamą dalį iš naujo, kol ji tinkamai prisitaikys.
 - Pritildykite.
 - Nuvalykite arba pakeiskite į ausį kišamą dalį.
-

Garsas iškraipomas.

- Pritildykite.
 - Įkraukite išseikvotą maitinimo elementą arba įdėkite naują (priklausomai nuo maitinimo elemento tipo).
 - Nuvalykite arba pakeiskite į ausį kišamą dalį.
-

Problema ir galimi sprendimai

Klausos aparatas skleidžia signalinius tonus.

- Įkraukite išseikvotą maitinimo elementą arba įdėkite naują (priklausomai nuo maitinimo elemento tipo).
-

Klausos aparatas neveikia.

- Įjunkite klausos aparatą.
 - Atsargiai iki galo uždarykite maitinimo elemento skyrių.
 - Įkraukite išseikvotą maitinimo elementą arba įdėkite naują (priklausomai nuo maitinimo elemento tipo).
 - Įsitikinkite, kad maitinimo elementas įdėtas taisyklingai.
 - Įjungta įjungimo delsa. Palaukite keletą sekundžių ir patikrinkite dar kartą.
-

Jei kyla kitų problemų, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.

Su šalimi susijusi informacija

Techninė priežiūra ir garantija

Serijos numeriai

Aparatas

Imtuvas

Kairė:

Dešinė:

Techninės priežiūros datos

1:

4:

2:

5:

3:

6:

Garantija

[sigijimo data:

Garantinis laikotarpis mėnesiais:

Jūsų klausos specialistas



Teisėtas gamintojas

Signia GmbH

Henri-Dunant-Strasse 100

91058 Erlangen

Vokietija

Tel. +49 9131 308 0

Pagamino Signia GmbH pagal prekių ženklų
licenciją Siemens AG.

Document No. 02718-99T01-8X00 LT

Order/Item No. 109 362 86

Master Rev02, 01.2016

© Signia GmbH, 02.2016



www.signia-hearing.com